

# チューブスピン バイリアクターチューブ



高品質精密成型

- ◆ 87015、87017、87050はキャップに5種類の異なる大きさの穴が開いています。  
87450、87600はキャップに4mmの穴が10箇所開いています。

	A	B	C	D	E
87015 15ml	0.4mm	0.6mm	1.0mm	1.25mm	1.5mm
87017 15ml					
87050 50ml	0.4mm	0.6mm	1.0mm	1.5mm	2.0mm
87450 450ml	4mmが10ヶ所開いています。				
87600 600ml					

- ・オートクレーブ不可
- ・DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free
- ・ガンマ線滅菌済
- ・材質：P.P (キャップはP.E)、P.P (ラック)





### シーリングパッケージ

ハサミやカッターナイフを使わずに開封できる為、コンタミネーションを防ぎます。

バイロジェンテストを実施しており、エンドキシンレベル0.06EU/ml以下であるノンバイロジェニックを保証しております。

- ◆ 87017は10ml、87050は35ml、87600は400mlまで培養液を入れることが可能です。
- ◆ 穴の塞ぎ方によって異なる条件で実験を行えます。最大31通り。
- ◆ すべての商品に疎水性PTFEフィルターキャップが装着されています。
- ◆ 遠心耐性 87015、87017、87050：15,500g  
87450、87600：3,500g
- ◆ 温度耐性：P.P (ポリプロピレン) -60~120℃  
P.E (ポリエチレン) -40~70℃

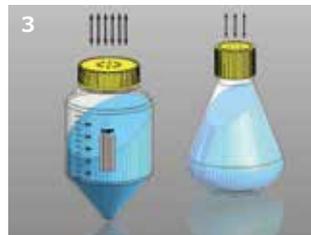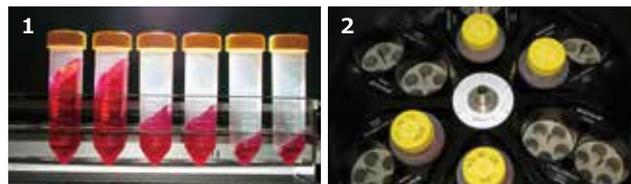

1. シーキングインキュベーターで使用します。容量を変えても同じ回転速度でサンプルがシェーキングできるようになっています。
2. 培養後そのまま遠心機に入れることが出来ます。
3. 表面積が大きくなるため、同等量のフラスコに比べ効率良くガス交換が可能

カタログNo.	容量 (mL)	タイプ	培養可能容量 (mL)	寸法 (mm)	滅菌	包装	希望販売価格
<b>87015</b>	15	コニカル	1~15	φ17.1×120	G 滅菌	800本 (40本×20パック)	<b>¥168,000</b>
<b>87017</b>	15	丸底	1~10	φ17.1×120	G 滅菌	800本 (40本×20パック)	<b>¥178,000</b>
<b>87050</b>	50	コニカル	1~35	φ30×115	G 滅菌	180本 (20本×9パック)	<b>¥50,000</b>
<b>387050</b> (3-B 個装)						50本 (1本個装×50パック)	<b>¥58,300</b>
<b>87056</b>	50	丸底	1~35	φ30×115	G 滅菌	180本 (20本×9パック)	<b>¥56,200</b>
<b>87450</b> (個装)	450	コニカル	1~300	φ96×145	G 滅菌	32本 (1本個装×32パック)	<b>¥96,200</b>
<b>87600</b> (個装)	600	コニカル	1~400	φ100×183	G 滅菌	26本 (1本個装×26パック)	<b>¥106,000</b>
<b>387600</b> (3-B 個装)						10本 (1本個装×10パック)	<b>¥84,900</b>

大箱包装：-

# チューブスピン バイリアクターチューブ用キャップ&ラック



450/600mlチューブ用フィルターキャップ (左: #87356) とイエローキャップ (右: #87355)



#87450/#87600専用ラックNo.99013 (左)



穴の塞ぎ方によって異なる条件で実験を行えます。



チューブスピンバイリアクターチューブキャップ全てに疎水性PTFEフィルターが付いています。



培養後、遠心機で容易に回収できます。

- ◆ 87356は4mmの穴が10箇所開いています。
- ◆ 穴の塞ぎ方によって異なる条件で実験を行えます。最大31通り。
- ◆ フィルターキャップには疎水性PTFEフィルターが装着されています。
- ◆ 温度耐性: P.P (ポリプロピレン) -60~120℃  
P.E (ポリエチレン) -40~70℃

- ・オートクレーブ不可
- ・DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free
- ・ガンマ線滅菌済
- ・材質: P.P (キャップはP.E)、P.P (ラック)



## シーリングパッケージ

ハサミやカッターナイフを使わずに開封できる為、コンタミネーションを防ぎます。

パイロジェンテストを実施しており、エンドトキシレベル0.06EU/ml以下であるノンバイロジェニックを保証しております。

カタログNo.	容量	寸法 (mm)	包装	希望販売価格	大箱包装
<b>87355</b>	450ml/600ml チューブ用イエローキャップ	φ70×21	36個 (1個個装×36パック)	<b>¥31,900</b>	—
<b>87356</b>	450ml/600ml チューブ用フィルターキャップ	φ70×21	36個 (1個個装×36パック)	<b>¥44,600</b>	—
<b>99017</b>	15/50ml 専用ラック 15ml×18本、50ml×10本		1ラック (1ラック×1パック)	<b>¥1,100</b>	1ラック×45
<b>99013</b>	バイリアクターチューブ 450ml/600ml 専用ラック 3本立て		1ラック (1ラック×1パック)	<b>¥5,300</b>	1ラック×6

## ◆お願いおよび注意事項◆

- 希望販売価格・・・希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格は参考であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。実際の販売価格は、ご注文の際に販売店様にてご確認ください。記載の希望販売価格は、当社が定める希望販売価格であり、参考価格です。本希望販売価格は2025年4月1日現在の価格で、同価格はカタログ、ホームページで確認できます。なお、予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際にご確認ください。記載の希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格には消費税は含まれておりません。
- 使用範囲・・・記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。

**BMBio** ビーエム機器株式会社  
〒135-0016 東京都江東区東陽2丁目2番20号 東陽駅前ビル  
www.bmbio.com

商品の仕様・詳細について TEL: 03-6666-5903 / FAX: 03-6666-5907  
商品の在庫・ご注文について TEL: 03-6666-5902 / FAX: 03-5677-4081

■ 代理店