



無料サンプル受付中！

詳しくは裏面をご覧ください。

# スクリーキャップチューブ



BMBio  
ST (Standard & Stable)

T サンプルストックチューブ



NEST クライオチューブ &  
サンプルストックチューブ

NEST®

BMBio  ビーエム機器株式会社

# T サンプルストックチューブ

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

オートクレーブ可能 (121°C, 15分)

## BMBio T サンプルストックチューブの特長


キャップの  
密着部分が深い



- ▶ 温度耐性: -80°C ~ 121°C
- ▶ 遠心耐性: 20,000RCF (xg) 純水時
- ▶ 透明度が非常に高く、サンプルの目視が容易
- ▶ 滅菌済は、材質が傷みにくい電子線滅菌
- ▶ 未滅菌のキャップはカラーが豊富 (レッド・ブルー・イエロー・グリーン・オレンジ)



- ▶ シリコン製のOリング付キャップは、ボイルや凍結時にもサンプルが漏れません。
- ▶ キャップとチューブの密着部分が深く、密閉性が優れています。
- ▶ 位置合わせタブ (米国特許 5891327号) により、脱塩処理などにおける複数回の遠心操作にて、チューブと遠心ローターの位置合わせが可能です。
- ▶ 長いリップ部により、フリーザーでの長期保存でも霜が付きにくいです。

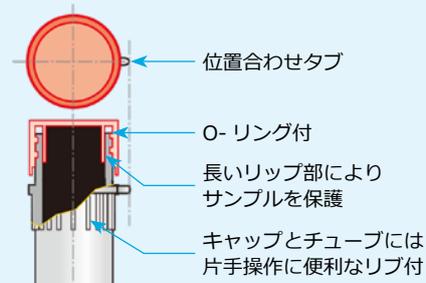

- ▶ 底形状は、コニカル型と自立型よりお選びできます。

コニカル型 0.5ml



カタログ No.

**BMSST-201**

未滅菌

チューブのみ ナチュラル

希望販売価格

**¥4,800**

包装: 500本 (500本×1パック) 大箱包装: 500本×8

**BMSSTC-◆**

未滅菌

BMSST-20X 用色付キャップ

希望販売価格

**¥10,200**

包装: 500本 (500本×1パック) 大箱包装: 500本×8

◆ 注文時にキャップの色をご指定してください。

R (レッド)、B (ブルー)、Y (イエロー)、G (グリーン)、O (オレンジ)、N (ナチュラル)

希望販売価格

**T-201S**

電子滅菌

キャップ付 ナチュラル

**¥18,400**

包装: 500本 (100本×5パック) 大箱包装: 500本×4

自立型 0.5ml



カタログ No.

**BMSST-200**

未滅菌

チューブのみ ナチュラル

希望販売価格

**¥4,800**

包装: 500本 (500本×1パック) 大箱包装: 500本×8

**BMSSTC-◆**

未滅菌

BMSST-20X 用色付キャップ

希望販売価格

**¥10,200**

包装: 500本 (500本×1パック) 大箱包装: 500本×8

◆ 注文時にキャップの色をご指定してください。

R (レッド)、B (ブルー)、Y (イエロー)、G (グリーン)、O (オレンジ)、N (ナチュラル)

希望販売価格

**T-200S**

電子滅菌

キャップ付 ナチュラル

**¥18,400**

包装: 500本 (100本×5パック) 大箱包装: 500本×4

コニカル型 1.5ml



カタログ No.

**BMSST-202**

未滅菌

チューブのみ ナチュラル

希望販売価格

**¥4,800**

包装: 500本 (500本×1パック) 大箱包装: 500本×8

**BMSSTC-◆**

未滅菌

BMSST-20X 用色付キャップ

希望販売価格

**¥10,200**

包装: 500本 (500本×1パック) 大箱包装: 500本×8

◆ 注文時にキャップの色をご指定してください。

R (レッド)、B (ブルー)、Y (イエロー)、G (グリーン)、O (オレンジ)、N (ナチュラル)

希望販売価格

**T-202S**

電子滅菌

キャップ付 ナチュラル

**¥18,400**

包装: 500本 (100本×5パック) 大箱包装: 500本×4

# Tサンプルストックチューブ

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

オートクレーブ可能 (121°C, 15分)

## 自立型 1.5ml



カタログ No.

**BMSST-205**

未滅菌

チューブのみ ナチュラル

希望販売価格

**¥4,800**

包装: 500本 (500本×1パック) 大箱包装: 500本×8

**BMSSTC-◆**

未滅菌

BMSST-20X 用色付キャップ

希望販売価格

**¥10,200**

包装: 500本 (500本×1パック) 大箱包装: 500本×8

◆ 注文時にキャップの色をご指定してください。

R (レッド)、B (ブルー)、Y (イエロー)、G (グリーン)、O (オレンジ)、N (ナチュラル)

希望販売価格

**T-205S**

電子滅菌

キャップ付 ナチュラル

**¥18,400**

包装: 500本 (100本×5パック) 大箱包装: 500本×4

## コニカル型 2.0ml



カタログ No.

**BMSST-203**

未滅菌

チューブのみ ナチュラル

希望販売価格

**¥4,800**

包装: 500本 (500本×1パック) 大箱包装: 500本×8

**BMSSTC-◆**

未滅菌

BMSST-20X 用色付キャップ

希望販売価格

**¥10,200**

包装: 500本 (500本×1パック) 大箱包装: 500本×8

◆ 注文時にキャップの色をご指定してください。

R (レッド)、B (ブルー)、Y (イエロー)、G (グリーン)、O (オレンジ)、N (ナチュラル)

希望販売価格

**T-203S**

電子滅菌

キャップ付 ナチュラル

**¥18,400**

包装: 500本 (100本×5パック) 大箱包装: 500本×4

## 自立型 2.0ml



カタログ No.

**BMSST-204**

未滅菌

チューブのみ ナチュラル

希望販売価格

**¥4,800**

包装: 500本 (500本×1パック) 大箱包装: 500本×8

**BMSSTC-◆**

未滅菌

BMSST-20X 用色付キャップ

希望販売価格

**¥10,200**

包装: 500本 (500本×1パック) 大箱包装: 500本×8

◆ 注文時にキャップの色をご指定してください。

R (レッド)、B (ブルー)、Y (イエロー)、G (グリーン)、O (オレンジ)、N (ナチュラル)

希望販売価格

**T-204S**

電子滅菌

キャップ付 ナチュラル

**¥18,400**

包装: 500本 (100本×5パック) 大箱包装: 500本×4

# サンプルストックチューブ

DNase, RNase, Pyrogen Free

オートクレーブ可能 (121℃, 15分)



※画像のキャップの色はブルーです。

## 特長

- ▶ 透明なポリマーポリプロピレン (PP) 製で、USP クラス VI 規格に準拠し、重金属イオンを含まないため、プロテオミクス、医薬品の研究開発、ゲノミクス、およびその他の分野で使用できます。
- ▶ チューブ本体の特別なローレットデザインは、片手で締めることができる特別なベースにはめ込まれています。
- ▶ 柔軟な O リングがスクリューキャップに装着され、サンプルチューブをしっかりと閉じます。ADR & IATA 規格に準拠、0.95bar の負圧テストで液漏れのないことを確認しています。
- ▶ 最大 20,000xg の遠心力に耐性
- ▶ 電子線滅菌、SAL=10<sup>-6</sup>



## サンプルストックチューブ (チューブのみ)

カタログ No.	容量	底形状		包装	希望販売価格
<b>WNB633901</b>	0.5mL	自立型	電子滅菌	2,000 本 (500 本×4 パック)	¥18,300
<b>WNB634901</b>	1.5mL	自立型	電子滅菌	2,000 本 (500 本×4 パック)	¥18,300
<b>WNB634911</b>	1.5mL	コニカル	電子滅菌	2,000 本 (500 本×4 パック)	¥18,300
<b>WNB635901</b>	2.0mL	自立型	電子滅菌	2,000 本 (500 本×4 パック)	¥18,300

## サンプルストックチューブ用スクリューキャップ

カタログ No.	キャップタイプ	色		包装	希望販売価格
<b>WNB633951N</b>	ループなし	ナチュラル	電子滅菌	2,000 本 (500 本×4 パック)	¥25,500
<b>WNB633961N</b>	ループ付	ナチュラル	電子滅菌	2,000 本 (500 本×4 パック)	¥34,300

# クライオチューブ

DNase, RNase Free

オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

キャップタイプ	アウターキャップ					インナーキャップ			
容量 (mL)	1.0	1.5	2.0	4.0	5.0	1.5	1.8	4.0	5.0
全高 (mm)	46	40.7	45.5	76.3	93.3	40.7	45.5	76.3	93.3
蓋の高さ (mm)	5.3	10				8.3			
外径 (mm)	8.85	12.85				12.10			
温度耐性	-196 ~ 121℃					-196 ~ 121℃			

## 特長

1. アウターキャップはねじ山が直接外部に露出しないため、**二次汚染の可能性を最小限に抑えることができます。**
2. インナーキャップはクライオチューブ本体と同径で、**集中保管用途に適しています。**
3. アウターキャップの最大容積は、インナーキャップよりも公称容積に近くなります。  
内容積は通常、液体凍結中に増加するため、アウターキャップおよびインナーキャップの両方の極低温チューブの推奨使用量は、**最大容積の80%**です。
4. いずれの保管方法も、**極低温貯蔵の安全性を確保することを目的**としており、ユーザーの実際のニーズに応じて自由に選択することができる。





バルクパック



ラック入り

### クライオチューブ (2D バーコードなし) バルクパック

カタログ No.	容量 (mL)	キャップタイプ	包装	希望販売価格
<b>WNB618901</b>	1.0	アウターキャップ	960 本 (96 本× 10 パック)	<b>¥25,700</b>
<b>WNB606901</b>	1.5	アウターキャップ	500 本 (50 本× 10 パック)	<b>¥15,100</b>
<b>WNB607401</b>	2.0	アウターキャップ	500 本 (50 本× 10 パック)	<b>¥17,300</b>
<b>WNB608401</b>	4.0	アウターキャップ	250 本 (50 本× 5 パック)	<b>¥7,900</b>
<b>WNB609401</b>	5.0	アウターキャップ	250 本 (50 本× 5 パック)	<b>¥12,200</b>
<b>WNB606801</b>	1.5	インナーキャップ	500 本 (50 本× 10 パック)	<b>¥18,500</b>
<b>WNB607301</b>	1.8	インナーキャップ	500 本 (50 本× 10 パック)	<b>¥18,700</b>
<b>WNB608301</b>	4.0	インナーキャップ	250 本 (50 本× 5 パック)	<b>¥9,500</b>
<b>WNB609301</b>	5.0	インナーキャップ	250 本 (50 本× 5 パック)	<b>¥13,200</b>

### クライオチューブ ラック入り

カタログ No.	容量 (mL)	キャップタイプ	包装	希望販売価格
<b>WNB606902</b>	1.5	アウターキャップ	1400 本 (100 本× 14 ラック)	<b>¥55,200</b>
<b>WNB607402</b>	2.0	アウターキャップ	1200 本 (100 本× 12 ラック)	<b>¥53,000</b>
<b>WNB608402</b>	4.0	アウターキャップ	800 本 (100 本× 8 ラック)	<b>¥32,700</b>
<b>WNB609402</b>	5.0	アウターキャップ	600 本 (100 本× 6 ラック)	<b>¥34,800</b>
<b>WNB606802</b>	1.5	インナーキャップ	1400 本 (100 本× 14 ラック)	<b>¥65,200</b>
<b>WNB607302</b>	1.8	インナーキャップ	1200 本 (100 本× 12 ラック)	<b>¥56,500</b>
<b>WNB608302</b>	4.0	インナーキャップ	800 本 (100 本× 8 ラック)	<b>¥38,000</b>
<b>WNB609302</b>	5.0	インナーキャップ	600 本 (100 本× 6 ラック)	<b>¥37,100</b>
<b>WNB606952</b>	1.5	アウターキャップ	1400 本 (100 本× 14 ラック)	<b>¥67,200</b>
<b>WNB607452</b>	2.0	アウターキャップ	1200 本 (100 本× 12 ラック)	<b>¥77,300</b>
<b>WNB608452</b>	4.0	アウターキャップ	800 本 (100 本× 8 ラック)	<b>¥65,800</b>
<b>WNB609452</b>	5.0	アウターキャップ	600 本 (100 本× 6 ラック)	<b>¥39,100</b>
<b>WNB606852</b>	1.5	インナーキャップ	1400 本 (100 本× 14 ラック)	<b>¥75,900</b>
<b>WNB607352</b>	1.8	インナーキャップ	1200 本 (100 本× 12 ラック)	<b>¥77,700</b>
<b>WNB608352</b>	4.0	インナーキャップ	800 本 (100 本× 8 ラック)	<b>¥48,300</b>
<b>WNB609352</b>	5.0	インナーキャップ	600 本 (100 本× 6 ラック)	<b>¥43,100</b>
<b>WNB618906</b>	1.0	アウターキャップ	960 本 (96 本× 10 ラック)	<b>¥38,000</b>
<b>WNB612891</b>	2.0	アウターキャップ	480 本 (48 本× 10 ラック)	<b>¥26,400</b>
<b>WNB614591</b>	4.0	アウターキャップ	480 本 (48 本× 10 ラック)	<b>¥34,900</b>



無料サンプル  
受付中！

フォームよりご応募下さい。  
<https://x.gd/805Z9>



## 特典

応募フォームのアンケートにお答えいただければ、  
さらにフリーザーボックス 81 穴を【BMFB-S81】を  
1 ラックプレゼントします！

※ 1.5ml、2.0ml 専用のラックとなります。



### ◆お願いおよび注意事項◆

- 希望販売価格・・・希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格は参考であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。  
実際の販売価格は、ご注文の際に販売店様にてご確認ください。  
記載の希望販売価格は、当社が定める希望販売価格であり、参考価格です。  
本希望販売価格は 2025 年 8 月 1 日現在の価格で、同価格は カタログ、ホームページで確認できます。
- 使用範囲・・・記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。  
人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。

■ 代理店