


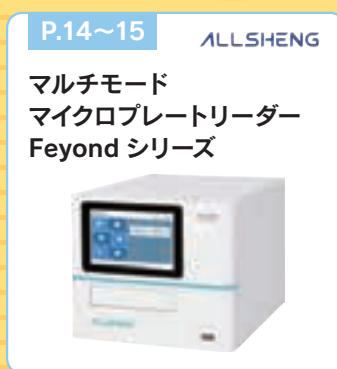

※キャンペーン期間内でも、予告なく仕様・価格の変更や製品の発売中止及び製造中止になる場合がありますのでご了承下さい。

INDEX

機 器

台数限定 RWD シングルセルディソシエーターキャンペーン	5
サンプル密閉式超音波破碎装置 Bioruptor® One	6
ビーズ式サンプル破碎装置 BeadBug™ 6マイクロチューブホモジナイザー	7～9
水分活性測定装置	10～11
シェーキングインキュベーター Incu-Shaker™	12
吸光マイクロプレートリーダー SMARTREADER™ 96	13
マルチモードマイクロプレートリーダー Feyondシリーズ	14～15
卓上遠心機	16～17
ボルテックスミキサー	18～19
マイクロプレートウォッシャー SMARTWASHER™ 96	20
アスピレーター ASPIRE™	21
セルカウンター C200FL自動セルカウンター	22
PCRサーマルサイクラー DQ24 PlusデジタルPCRシステム	23

台数限定キャンペーン

・RWD シングルセルディソシエーター	5
---------------------------	---

冊子に掲載されない
キャンペーンがある場合は、
こちらに掲載されます。



消耗品

チップ

-  プラチナローリテンションチップ & フィルター付チップ 24~25
- Chanshow スタンダードチップ & フィルター付チップ 26~27
- エコノミカルフィルター付チップ 28
- QSPローリテンションチップ & フィルター付チップ 29~31

ピペット

- Accumax Fab-LF (ライトフォースタイプ) マシングルチャンネル・マルチチャンネルピペット 32
-  **ここがイチオシ!** ピペットバル シングルチャンネル・マルチチャンネルピペット 33~35

リザーバー

- エコノミカルタイプ BMBioリザーバー 36
- 8レーン・12レーンリザーバー 37

チューブ・プレート・シール

- リングロック・サンプリング・セーフロックチューブ 38~39
- 2ポジションキャップ付チューブ 40~41
- 96ウェル PCRプレート 42
- 96ウェル テストプレート 43

細胞培養

- TPP 遠心管・細胞培養プレート 少量パッケージタイプ 44



アウトレットコーナー 45~55

- NOVAS フィルターチップ
- ロングチップ 低吸着タイプ
- NOVAS PCR 8連チューブ・キャップ
- A&D 電動ピペッター
- Ansell使い捨てグローブ

機器

ピペット

チップ

リザーバー

チューブ・プレート

細胞培養

アウトレット

共通アイコン



当社の商品の中でもより多くご使用、ご注文載っている商品です。



新発売・今回のカタログから新掲載・または直近に発売した商品です。



商品の1本、1個あたりの概算単価を表しております。
(概算単価は/バルク包装タイプより算出)



電子線照射により予め滅菌しておりますので、そのまますぐにご使用戴けます。



ガンマ線照射により予め滅菌しておりますので、そのまますぐにご使用戴けます。



商品が1個単位で個別包装滅菌されております。



未滅菌の商品です。商品種によっては、
DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Freeの状態です。



滅菌済み商品です。そのまますぐにご使用戴けます。



ご購入日より1～5年保証となります。取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態のもとで保証期間中に故障した場合は無料修理をさせていただきます。詳しくは、当社保証規定をご覧ください。



商品の写真を原寸大で掲載しております。



商品が1本、1個等の単位で個別包装されております。



商品に目盛(外側にラインまたは、印字、刻印等)が付いておりますので、サンプル分注・保存時の目視による容量の目安となります。



商品の透明度が一段と高くサンプル目視等に最適です。



在庫限りで販売終了となります。



在庫限り特別価格となります。
記載の数量に達した場合、当キャンペーン価格での販売はお請けできません。

チップアイコン



チップ先端部分がテーパークット(斜角)になっている為、サンプル分注時にサンプルがチップ外壁に付きにくく、高い分注精度が得られます。



チップ先端部分がストレートになっている為、サンプル分注時にプレートの内壁やチューブの内壁にチップが引っかかる事が少ない形状です。



チップ先端部分の内径が通常のチップの約10倍ありますので、粘性の高いサンプル、ゲノムDNA、細胞培養の分注に最適です。



ショートタイプのチップで、微量のサンプル分注に最適です。



ロングタイプのチップで、1.5ml・2.0mlのサンプリングチューブや12x75mm等のテストチューブからのサンプル分注に最適です。



チップのピペットとの適合部分に柔軟性を持たせ、非常に少ない力でチップの脱着が行えます。反復疲労障害を軽減します。



チップのピペットとの適合部分に柔軟性及び特殊成型を持たせ、従来の様に強く何度もピペットを落ち込むことなく、ピペットの重さを利用した非常に少ない力でチップの脱着が行えます。反復疲労障害を軽減します。



サンプル吸着・残液の非常に少ない商品です。希少なサンプルの分注や粘性の高いサンプルの保存に適し、透明度も高い商品です。



チップ材質を高品質バージンポリプロピレンを使用し、高度な成型を行う事で世界トップクラスの液切れを実現した商品です。



商品が袋(または+箱)にそのまま包装されております。



チップがラックに立った状態で包装されております。



チップ用の空ラックです。(包装にチップは含まれません。)



チップの詰め替えタイプです。空になったラックに素早く簡単にチップを充填出来ますので大変便利でECOな商品です。



チップのフィルター付きタイプです。PCR産物の分注などエアロソールによるコンタミネーションを防止する必要性の高い実験に最適です。

チューブアイコン



チューブにロック性能またはスクリーキャップ式のキャップシーリングにより耐ボイル性に優れています。



スクリーキャップ式のキャップシーリングにより耐冷性に優れています。



チューブのキャップが平らになっており、ラベルの貼付や油性マジックでの文字の書き込みが出来ます。



チューブのキャップがドーム状になっています。



チューブ胴体部の外側(またはキャップ表面)に書き込みができる部分(印字またはfrosted)があります。



チューブのキャップ内にシリコン製のリングを使用しておりますので気密性に優れています。



特殊成型により、高気密かつ、開閉しやすい構造で簡単にパチッと閉まります。

プレートアイコン/プレートシールアイコン



ウェル(またはチューブ)底が丸底になっています。



ウェル(またはチューブ)底が平底になっています。



ウェル(またはチューブ)底がV底になっています。



プレート(またはチューブ)・マットのウェル形状が○(サークル)型になっています。



プレート(またはキャップ・マット)をハサミでカット出来ます。



シールがロール状に包装されております。箱から引き出しながらご使用戴けます。



シールがシート状に包装されております。プレート形状に合わせてプレカットされているタイプや、レーザープリンターでの一括印刷用などがございます。



粘着タイプのシールです。シール用ローラー・パッドで粘着シーリングが行えます。

機器アイコン



機器商品の動線を動線を表しています。



機器商品の仕様温度の上限を表しています。



機器商品の最大遠心力を表しています。

商品の返品・交換について

製造元にて品質管理については万全を期して製造しておりますが、万一品質上 問題のある不良品がございましたら、お手数ですがご連絡お願いいたします。
新しい商品と交換させていただきます。(ご使用に問題のない程度の外装箱の汚れ、破損、キズなどは許容範囲とさせていただきます。)

尚、お客様のご都合による返品・交換は、取扱商品の特性上、基本的には承っておりませんので、予めご了承ください。

シングルセル化の価格革命

台数限定キャンペーン

2026年6月～ 各モデル5台ずつ対象



- 新鮮組織・凍結組織・FFPEから組織分散・シングルセル化
- 温度制御可能な独立チャンネルで実験をスピードアップ
- あらゆる組織で均一・再現性ある実験が可能

名 称	型式	数量	価格（税抜き）
シングルセルディソシエーター （2チャンネル）	VDSC-200	一式	1,280,000円 ⇒ 980,000円
シングルセルディソシエーター （4チャンネル）	VDSC-410	一式	2,580,000円 ⇒ 1,980,000円
シングルセルディソシエーター （8チャンネル）	VDSC-810	一式	3,450,000円 ⇒ 2,700,000円

詳細はこちら→



サンプル密閉式超音波破碎装置

Bioruptor®-One

ソニックバイオ株式会社
SONIC BIO CO., LTD.

超音波発振装置 と 破碎槽

一体型となりながらコンパクト

サンプル密閉式超音波破碎装置 Bioruptor®-One とは

- ・サンプルの入ったチューブに水槽内で超音波を照射する破碎装置です。
- ・チューブの蓋を閉めたまま超音波処理できるので、飛散・コンタミネーションがありません。
- ・多検体（0.5mlチューブ 12本 1.5mlチューブ 8本）同時処理が可能です。
- ・冷却水を入れたバスタブで超音波処理することにより、投げ込み式で問題となるチューブ内の局所的な温度上昇がありません。
- ・各種アクセサリにより0.5mlチューブから50ml遠心管での処理が可能です。
- ・容量が10ml以上のチューブでは、破碎効率を上げるためオートクレープ可能な共振棒を使用します。



【特徴】

- ◆ 超音波発生装置や破碎槽、消音箱が一体型になりコンパクト
- ◆ 専用冷水循環器も操作がより簡単に
- ◆ 従来のBioruptor® II Type6にくらべ1.5ml、0.5mlチューブのサンプル処理数がアップ
- ◆ カバーを開けると運転が停止する安全設計

Bioruptor®-One 標準セット

Bioruptor®-One、専用冷水循環器、1.5ml および 0.5ml チューブ用アタッチメントとメインボディがセットになっていてすぐに超音波破碎が開始できるお勧めセット



Bioruptor®-One

破碎槽サイズ (W×D×H)	175×160×280mm
同時処理本数	1.5mlチューブ×8本、0.5mlチューブ×12本
超音波周波数	20KHz
超音波出力	High/Low2段切替式
ランタイム	1～99サイクル
インターバルタイマー	ON：1～99秒、OFF：30～99秒
装置サイズ (W×D×H)	350×250×300mm
重量	9Kg
電源	AC100-240V、50/60Hz、4.5A

専用冷水循環器

装置サイズ (W×D×H)	410×280×300mm
重量	7.3Kg
電源	AC100-240V、50/60Hz、1.0A

※予告なく仕様が変更される場合がございます。

● Bioruptor®-One標準セット

カタログ No.

BR-1ALL

1年保証

希望販売価格

¥1,880,000

キャンペーン中の参考価格

→ ¥1,504,000

Bioruptor®-One 標準セットは下記 5 点のセット価格になります

カタログ No.	商品名	希望販売価格
BR-1	Bioruptor®-One	¥1,740,000
CR-02	Bioruptor®-One専用冷水循環器	¥390,000
SRD-MB1	スライド式アタッチメントメインボディ	¥71,000
SRD-AD0512	スライド式アタッチメントアダプター0.5ml12本用	¥99,000
SRD-AD1508	スライド式アタッチメントアダプター1.5ml8本用	¥95,000

■ 構成：Bioruptor®-One標準セット

Bioruptor®-One本体、専用冷水循環器本体、1.5mlチューブ用アタッチメントアダプター、0.5mlチューブ用アタッチメントアダプター、アタッチメントメインボディ、電源コード、マニュアル、保証書

*Bioruptor®-Oneおよび専用冷水循環器単体時は本体、電源コード、マニュアル、保証書となります。

*キャンペーン対象外

ビーズ式サンプル破碎装置

BeadBug™ 6 マイクロチューブホモジナイザー

▲ BeadBug™ 6
マイクロチューブホモジナイザー

- ◆ 溶解、粉砕、均質化を非常に強力に実行します
- ◆ ティッシュグラインダーよりも早く、効率的です
- ◆ 最大6チューブの同時処理が可能です
- ◆ 手動ホモジナイザー等によるコンタミネーションを減少させます
- ◆ 様々なサイズのビーズ充填済のチューブが使用可能です

速度範囲	2500~4350rpm
容量	6×2.0ml (Screw cap/skirted or non-skirted)
タイマー	1~90秒 10サイクルまで
外寸 (W×D×H)	220×355×205mm
重量	9kg
電源	100-240V、50-60Hz

カタログ No.

D1036 1年保証

希望販売価格

¥672,000

キャンペーン中の参考価格

¥537,600

■ 構成：BeadBug™ 3/6本体、電源コード、マニュアル、保証書



動画はこちら



機器

ビヘット

チップ

リザーバー

チューブ・プレート

細胞培養

アウトレット

ビーズ式サンプル破碎装置

BeadBug™



機器

ビベット

チップ

リザーバー

チューブ・プレート

細胞培養

アウトレット

カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格
D1036-A5	チューブホルダー 2本×5ml チューブ	1 式	¥24,800
D1031-01	0.1mm シリカ（ガラス）ビーズ（2ml チューブ）		¥33,000
D1031-05	0.5mm シリカ（ガラス）ビーズ（2ml チューブ）		¥33,000
D1031-10	1.0mm シリカ（ガラス）ビーズ（2ml チューブ）		¥33,000
D1032-01	0.1mm シルコニウムビーズ（2ml チューブ）	50 本	¥46,000
D1032-05	0.5mm シルコニウムビーズ（2ml チューブ）		¥46,000
D1032-10	1.0mm シルコニウムビーズ（2ml チューブ）		¥46,000
D1032-15	1.5mm シルコニウムビーズ（2ml チューブ）		¥46,000
D1032-30	3.0mm シルコニウムビーズ（2ml チューブ）		¥46,000
D1032-SK	スターターキット シルコニウムビーズ（各 10 本 0.1, 0.5, 1.0, 1.5, 3.0mm）	1 式	¥46,000
D1033-28	2.8mm ステンレススチールビーズ（2ml チューブ）	50 本	¥46,000
D1031-T20	2ml チューブ コニカル（ビーズ無し）	1,000 本	¥48,000
D1031-T21	2ml チューブ コニカル（ビーズ無し）	50 本	¥12,000
D1031-RFS	2ml チューブ 自立型（ビーズ無し）	600 本	¥89,000
C1005-SC5	5ml チューブ未滅菌、スクリュキャップ付	500 本	¥22,500
C1005-SC5-S	5ml チューブ用スクリュキャップ付 滅菌済		¥26,500
D1033-30G	ガーネット断片 /6mm シルコニウム 混合ビーズ（2ml チューブ）	50 本	¥46,000
D1034-MX	0.1mm シリカ /1.4mm シルコニウム /4mm シリカ 混合ビーズ（2ml チューブ）		¥46,000
D1032-60	6mm 酸化ジルコニウム被覆シリカビーズ（2ml チューブ）		¥46,000
D1034-28	2.8mm ステンレス スチールビーズ（5ml チューブ）		¥61,000
D1131-01	0.1mm シリカ（ガラス）ビーズ 200g（バルク）	1 パック	¥62,000
D1131-05	0.1mm シリカ（ガラス）ビーズ 200g（バルク）		¥62,000
D1131-10	0.5mm シリカ（ガラス）ビーズ 200g（バルク）		¥62,000
D1132-01TP	0.1mm シルコニウムビーズ 250g（バルク）		¥125,000
D1132-05TP	0.5mm シルコニウムビーズ 250g（バルク）		¥125,000
D1132-10TP	1.0mm シルコニウムビーズ 250g（バルク）		¥125,000
D1132-15TP	1.5mm シルコニウムビーズ 250g（バルク）		¥125,000
D1132-30TP	3.0mm シルコニウムビーズ 300g（バルク）		¥125,000
D1133-28	2.8mm ステンレス スチールビーズ（バルク）	1,000 個	¥125,000
D1134-50	5mm ステンレス スチールビーズ（バルク）		¥115,000
D1132-60	6mm 酸化ジルコニウム被覆シリカビーズ（バルク）		¥11,000
D1133-G	ガーネット断片 250g	1 パック	¥63,000

*キャンペーン対象外

(参考資料) ビーズ種類別 破碎サンプル対応表

	ビーズ材質	シリカ（ガラス）			ジルコニウム					ステンレス スチール	ガーネット断片 / ジルコニウム	シリカ（ガラス） / ジルコニウム
	ビーズ径	0.1 mm	0.5 mm	1.0 mm	0.1 mm	0.5 mm	1.0 mm	1.5 mm	3.0 mm	2.8 mm	0.5/6mm	混合
動物	脂肪							●				
	血管							●	●			
	骨									●		
	脳							●	●			
	性腺							●	●			
	毛髪								●	●	●	
	心臓							●	●			
	腎臓							●				
	肝臓							●	●			
	肺							●	●			
	筋肉								●	●		
	脾臓							●	●			
	皮膚								●		●	
	脾臓							●	●			
	歯								●	●		
	ハエ								●	●		
	ダニ								●	●		
	蚊						●	●	●			
微生物	藻類		●			●						
	細菌	●	●		●	●						
	真菌		●	●		●	●					
	カビ		●			●						
	孢子		●	●		●	●					
	酵母		●	●		●	●					
植物 / 土壌	葉								●	●		
	ナッツ									●		
	軟組織								●	●		
	硬組織								●	●	●	
	種子								●	●		
	茎								●	●		
	土壌							●				●
	珊瑚									●		
糞便	糞便（ヒト）							●				●
	糞便（動物）								●	●		●

水分活性測定装置

LabMASTER-aw NEO/LabTouch-aw/LabSwift-aw/LabStart-aw



機器

ビヘット

チップ

リザーバー

チューブ・プレート

細胞培養

アウトレット

LabMASTER-aw NEO

水分活性測定のスタンダードな装置

食品会社や製薬会社の品質保証を行うラボで、日常的に水分活性を測定するのに最適な装置です。製品ラインアップの中で最も技術的に優れた水分活性測定装置です。

- ◆ 業界最高水準の精度 $\pm 0.0030Aw$ （小数点以下4桁）
- ◆ 幅広い測定レンジ $0.0300 \sim 1.0000Aw$ 、 $0 \sim 60^{\circ}C$
- ◆ 校正可能範囲（データ保証範囲） $0.0400 \sim 1.0000Aw$
- ◆ 温度制御機能 $0 \sim 60^{\circ}C$ （精度 $\pm 0.1^{\circ}C$ ）
- ◆ アルコールや揮発性成分にも対応（専用センサー・フィルター）
- ◆ 食品衛生検査指針（2015）、日本薬局方準拠
- ◆ 21CFR Part 11 準拠

カタログ No.

希望販売価格

AX-LM-NEO-ENS

¥2,890,000

● アルコール含有サンプル用

希望販売価格

AX-LM-NEO-ELS

¥2,960,000

■ 構成：LabMASTER-aw NEO本体、SDカード、電源コード、マニュアル、保証書

*キャンペーン対象外

LabTouch-aw

コストパフォーマンスに優れた確かなクオリティの1台

研究室や製造・生産ラインなど正確な水分活性値が必要な現場で、リーズナブルに導入していただける水分活性測定装置です。

- ◆ 測定精度 $\pm 0.005Aw$ （小数点以下3桁）
- ◆ 幅広い測定レンジ $0.030 \sim 1.000Aw$ 、 $5-45^{\circ}C$
- ◆ 校正可能範囲（データ保証範囲） $0.110 \sim 0.970Aw$
- ◆ 温度制御機能 $15 \sim 30^{\circ}C$ （精度 $\pm 0.1^{\circ}C$ ）*昇温機能のみ
- ◆ アルコールや揮発性成分にも対応（専用センサー・フィルター）
- ◆ 食品衛生検査指針（2015）

カタログ No.

希望販売価格

AX-LABTOUCH-AW

¥1,680,000

● アルコール含有サンプル用

希望販売価格

AX-LABTOUCH-AWCM3

¥1,730,000

■ 構成：LabTouch-aw本体、SDカード、電源コード、マニュアル、保証書

*キャンペーン対象外



LabSwift-aw

持ち運び可能な水分活性測定装置

コンパクトサイズでキャリングケースによる持ち運び可能な水分活性測定装置で、日常使用から他所（コンセント要）でのサンプル測定に対応します。

- ◆ 測定精度 $\pm 0.010Aw$ （小数点以下3桁）
- ◆ 幅広い測定レンジ $0.030 \sim 1.000Aw$ 、 $5 \sim 45^{\circ}C$
- ◆ 校正可能範囲（データ保証範囲） $0.110 \sim 0.900Aw$
- ◆ 現場での測定に最適なコンパクトサイズ
- ◆ 揮発性成分にも対応（フィルター）

カタログ No.

希望販売価格

AX-LABSWIFT-AW-EUR 1年保証

¥900,000

■ 構成：LabSwift-aw本体、SDカード、キャリングケース、ACアダプター、マニュアル、保証書

*キャンペーン対象外



LabStart-aw

安価な水分活性測定装置の導入モデル

食品の安全を守る強い味方。生産現場で手軽に水分活性検査が行えます。

- ◆ 測定精度 $\pm 0.03Aw$ （小数点以下2桁）
- ◆ 幅広い測定レンジ $0.03 \sim 1.00Aw$ 、 $0 \sim 30^{\circ}C$
- ◆ 校正可能範囲（データ保証範囲） $0.33 \sim 0.75Aw$
- ◆ 低～中程度の水分活性測定に対応

カタログ No.

希望販売価格

AX-LABSTART-AW 1年保証

¥530,000

■ 構成：LabStart-aw本体、ACアダプター、マニュアル、保証書

*キャンペーン対象外

商品名	LabMaster-aw neo	LabTouch-aw CM-2	LabSwift-aw	LabStart-aw
測定方式	湿度：電気抵抗式 温度：赤外線温度センサー			
サンプル測定可能範囲 ＊（）内、校正可能範囲	0.0300～1.0000Aw (0.0400～1.0000Aw)	0.030～1.000Aw (0.110～0.970Aw)	0.030～1.000Aw (0.110～0.900Aw)	0.03～1.00Aw (0.33～0.75Aw)
校正範囲内測定精度	±0.003Aw	±0.005Aw	±0.010Aw	±0.03Aw
再現性	±0.002Aw		±0.003Aw	±0.01Aw
最小表示	±0.0001Aw 0.01℃	±0.001Aw 0.1℃		±0.01Aw 0.1℃
測定時間	10分			
温度制御	0℃～60℃	15℃～30℃ (昇温機能のみ)	機能なし	
外寸（L×W×H）	423×260×186mm	200×285×105mm	225×140×85mm	
重量	10kg	2.8kg	1.2kg	
電力消費	100V、50/60Hz、42W	100V、50/60Hz、10W		

シェーキングインキュベーター

Incu-Shaker™



Incu-Shaker™ 10L/10LR シェーキングインキュベーター



Incu-Shaker™ 10L
シェーキングインキュベーター



Incu-Shaker™ 10LR
シェーキングインキュベーター

Incu-Shaker™ 10L は、大量な作業量と連続使用に耐えるように設計されたヘビーデューティーな性能の製品です。その優れた温度精度と均一性は、チャンバー全体の温度を正確に維持する独自の熱分布技術によって支えられています。成層による不均一性は無視できるレベルまで低減され、選択された温度はコーナーでも0.25%以内に正確に維持されます。

標準的なラバーマットのプラットフォームが付属しており、組織培養フラスコ、ペトリ皿、染色トレイ、その他の平らな容器の使用に理想的です。

便利な MAGic Clamp™ プラットフォームは、三角フラスコや試験管ラックに使用することもできます。独自のマグネット式アタッチメント（特許取得済み）は、異なるサイズのフラスコクランプを瞬時に交換する最も簡単な方法です。

- ◆ 大型プラットフォーム（45 × 45cm、2L フラスコ5本）
- ◆ 比類なき温度均一性
- ◆ 19mm の振とう径で効率的なエアレーション、振とう
- ◆ MAGic Clamp™ の採用によりアタッチメントの交換が簡単
- ◆ 冷却機能付き（H2012のみ）
- ◆ ペトリディッシュやマイクロプレート用の棚を設置可能（別売）

● Incu-Shaker™ 10L シェーキングインキュベーター

カタログ No.

H2010

希望販売価格

¥1,849,000

キャンペーン中の参考価格

→ **¥1,479,200**

● Incu-Shaker™ 10LR シェーキングインキュベーター

カタログ No.

H2012

希望販売価格

¥2,614,000

キャンペーン中の参考価格

→ **¥2,091,200**

■ 構成：Incu-Shaker™ 10L/10LR 本体、電源コード、マニュアル、保証書

カタログNo.	H2010	H2012
スピード設定範囲	30～300rpm（1rpm刻み）	
振とう径	19mm	
温度設定範囲	室温+5℃～60℃（0.1℃刻み）	室温-15℃～60℃（0.1℃刻み）
温度精度	±0.1℃	
温度均一性	±1.25℃	
タイマー設定範囲	1分～48時間/連続	
プラットフォームサイズ	450×450mm	
外寸（W×D×H）	510×650×470mm	510×790×560mm
重量	55kg	77kg
電源	115Vまたは230V、50-60Hz、480W	115Vまたは230V、50-60Hz、1,200W



動画はこちら



カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格
H1010-MR	MAGic Clamp™ ユニバーサルプラットフォーム フラスコ & チューブラック（45.7 × 45.7cm）	1 式	¥102,000
H1010-P-MP	マイクロプレート専用プラットフォーム		¥230,000
H1010-P-SP	ユニバーサルプラットフォーム	1 個	¥178,000
H1010-SH	シェルフ ペトリディッシュ、プレート、トレイ用		¥41,000

*キャンペーン対象外

*当ページ掲載商品は包装：1 式、大箱包装：なしです。 *キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

吸光マイクロプレートリーダー

SMARTREADER™ 96



コストパフォーマンスに優れたマイクロプレートリーダー

- ◆ 直感的な7インチカラータッチスクリーンコントロールパネル
- ◆ フィルターベースシステム、波長範囲340~750nm
- ◆ スタンドアロンで作業可能。データ転送用のUSBフラッシュドライブ付き
- ◆ 吸光度の範囲 0.0~4.000Abs
- ◆ 8チャンネル垂直光路、無分散
- ◆ マルチスピードプレートシェーカー内蔵
- ◆ MR9600-Tは、温度制御機能を備え、プレートインキュベーションが可能



Accuris SmartReader™ 96 MR9600 は、濃度または吸光度の測定を日常的に行っているラボにとって最適な装置です。7インチのタッチスクリーン、直感的なソフトウェアとグラフィカルなインターフェースにより、スタンドアロンな 96 ウェル用プレートリーダーとして簡単に使用でき、外部のコンピュータや追加のソフトウェアは必要ありません。

吸光度測定でよく使用される 4 種類のフィルター (405, 450, 492, 630nm) が標準で付属されています。さらに 26 種類のフィルターのご用意があり、340 ~ 750nm の全領域をカバーします (別売)。フィルターホイールにより、一度に最大 8 つのフィルターを装着することができ、プログラムで使用するフィルターを選択することができます。2 波長による測定も可能です。複数回の吸光度測定を設定することでカインティクス解析も可能です。

本体の操作はタッチスクリーン、またはマウスを接続して行います。メニュー画面から波長フィルターの選択、シェイクパラメータの設定、プレートレイアウトの詳細入力、読み取りプロトコルやデータ計算の詳細を選択することができます。

MR9600-T は、処理中のプレートをインキュベートするための精密な温度制御が可能なモデルです。環境温度より 5℃高い温度から 50℃まで維持することができます。



Plate Layout Screen



Reading Results Screen



Printer Compatible



Windows Compatible



Touch Screen



Color Display



USB File Storage

ディスプレイ	7インチタッチスクリーン (800×480ピクセル)
光源	クオーツ・ハロゲンランプ 6V/10W
波長	340-750nm (405, 450, 492, 630nm filters included)
フィルター半値幅	3 ~ 9nm
読み取り範囲	0 ~ 4.000Abs
直線性 (405nm)	0 ~ 2.000Abs < +1% 2 ~ 4.000Abs < +2%
分解能	0.001Abs
正確度 (405nm)	+1% (0-3Abs) +2% (3-4Abs)

精度 (405nm)	CV < 0.2% (0-3) Abs CV < 1.0% (3-4) Abs
テストスピード	6秒以下 (96ウェルプレート)
振とうスピード	低・中・高 3モード
操作	本体画面 タッチスクリーンコントロール
保存	プログラム数: 200件、テストレコード: 10万件
外部接続	USBポート
サイズ (WxDxH)	295×440×225mm
重量	10Kg
電源	AC100-240V、50-60Hz、2A

● Accuris SmartReader™ 96 吸光マイクロプレートリーダー

カタログ No.

MR9600 1年保証

希望販売価格

¥1,630,000

キャンペーン中の参考価格

➔ ¥1,304,000

● Accuris SmartReader™ 96 吸光マイクロプレートリーダー 温度調節機能付き

カタログ No.

MR9600-T 1年保証

希望販売価格

¥1,740,000

*キャンペーン対象外

■ 構成: 本体、フィルター (405nm, 450nm, 492nm, 630nm)、電源コード、マニュアル、保証書

カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格
MR9600-PC	SmartReader PC ソフトウェア MR9600 & MR9600-T 用	1式	¥67,900
MR9600-TP	MR9600用 サーマルプリンター	1式	¥77,400
MR9600-PA	MR9600-TP用ペーパーロール 4本	1式	¥8,500

*キャンペーン対象外

*当ページ掲載商品は包装: 1 式、大箱包装: なしです。 *キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

機器

ビヘット

チップ

リザーバー

チューブ・プレート

細胞培養

アウトレット

プレートリーダー

マルチモード マイクロプレートリーダー Feyondシリーズ

ALLSHENG

Allshengマルチモードマイクロプレートリーダーシリーズ製品は、マイクロプレートの様々な検出ニーズを満たすことができます。吸光度、蛍光、化学発光、時間分解蛍光、蛍光偏光を含む様々なマイクロプレートリーダーソリューションを提供し、お客様のワークフローのニーズにお応えします。また、ユーザー様の検出実験結果を向上させるために、モジュール式でアップグレード可能な特殊検出アクセサリを取り揃えています。

マルチモードプレートリーダー選択ガイド

モデル	Feyond-A300	Feyond-A400	Feyond-A500	Feyond-F100	Feyond-L100
使用可能プレート	6-384				
吸光度測定	●	●	●	—	—
蛍光測定	●	●	●	●	—
化学発光検出	●	●	●	—	●
時間分解蛍光測定	—	●	●	—	—
蛍光偏光検出	—	—	●	—	—
キセノンランプ	●	●	●	●	—
波長範囲	吸光度：200-1000nm			蛍光： EX: 200-1000nm EM: 270-850nm	化学発光： 200-850nm
	蛍光：EX: 200-1000nm；EM: 270-850nm				
	化学発光：200-850nm				
	—	—	蛍光偏光： 300 - 850nm		
波長選択	吸光度：モノクロメーター / 蛍光：フィルター			フィルター	
インキュベーション温度	室温 +4℃～ 45℃				
ディスプレイサイズ	10 インチ				
システム	アンドロイドシステム				
解析ソフト	Reader It-II analysis software（外部 PC 用）				
アクセサリー	微量測定用プレート，インジェクター			インジェクター	
					

基本仕様

モデル		Feyond-A300	Feyond-A400	Feyond-A500	Feyond-F100	Feyond-L100
サポート	プレート	6-384				
	アクセサリー	微量測定用プレート、インジェクター（いずれもオプション）			インジェクター（オプション）	
振とう・インキュート	振とうモード	リニア、アニュラー、ダブルアニュラー				
	設定温度範囲	室温 +4℃～45℃				
	温度均一性	±0.5℃ @37℃				
ソフトウェア	スクリーンサイズ	10インチ				
	操作法	タッチスクリーン、マウス				
	データ容量	10 GB				
	ネットワーク	データをFTPを介してPCに転送することが可能				
その他	外部出力	2 USB Type Aポート, 1 USB Type Bポート, 1 Ethernetポート, Rs232 bus interface（インジェクター用）				
	電源	AC 100-240V, 50-60Hz				
	サイズ (W×D×H)	420×550×386mm			440×420×315mm	
	重量	33kg			25kg	

■ 構成：

Feyond-A300/A400/A500: 本体、電源ケーブル、マウス、USB、フィルターアッセンブリ、マニュアル、保証書

Feyond-L100: 本体、電源ケーブル、USB、レンチ、ドライバー、マニュアル、保証書

Feyond-F100: 本体、電源ケーブル、レンチ、ドライバー、マニュアル、保証書

カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
AS-19050-00	Feyond-A300 マルチモードプレートリーダー	1年保証 1式	¥5,745,000 →	¥4,596,000
AS-19060-00	Feyond-A400 マルチモードプレートリーダー	1年保証 1式	¥6,205,000 →	¥4,964,000
AS-19070-00	Feyond-A500 マルチモードプレートリーダー	1年保証 1式	¥8,886,000 →	¥7,108,800
AS-19090-00	Feyond-L100 発光プレートリーダー	1年保証 1式	¥3,830,000 →	¥3,064,000
AS-19100-00	Feyond-F100 蛍光プレートリーダー	1年保証 1式	¥4,213,000 →	¥3,370,400
AS-19011-01	ReaderIt-II PC analysis software (1 ライセンス)	1式	¥38,300	
AS-19011-02	微量測定用プレート	1枚 (1枚×1パック)	¥567,000	*キャンペーン対象外
AS-19011-03	バリデーション用プレート	1枚 (1枚×1パック)	¥671,000	
AS-19011-04	自動インジェクター	1式	¥1,724,000	

卓上遠心機

Palm Micro Centrifuge

BIOLOGIX
GROUP LIMITED

ここが
イチオシ!
安い!!



回転数7,000rpmの微量サンプルの遠心に最適

MAX
2,680_{yg}

収容本数	0.2/0.5/1.5/2.0mlチューブ×8本、 0.2ml 8連PCRチューブ×2本
最大遠心力	2,680RCF(xg)
最大回転数	7,000rpm
タイマー	連続運転
サイズ (W×D×H)	150×150×117mm
重量	0.5kg
電源	100-240V、50/60Hz

カタログ No.

01-8001 1年保証

希望販売価格

¥45,400

キャンペーン中の参考価格

→ ¥36,320

■ 構成：Palm本体、0.2mlチューブアダプター、8連チューブ用ローター、電源ケーブル、マニュアル、保証書



動画はこちら



ミニ卓上遠心機

Flat Mini

BMBio
ECO (Economy & Ecology)

- ◆ 簡単操作（リッドを閉じるとスタート、リッドを開けるとストップ）
- ◆ ショート遠心と15分間連続遠心が可能
- ◆ 1.5/2.0mLチューブ用ローター、0.2mL 8連PCRチューブ用ローター付属
- ◆ 非接触型リッドセンサー採用

チューブ数	1.5/2.0mLチューブ6本または 0.2mL 8連PCRチューブ 2ストリップ (0.2mL PCRチューブ 16本)
最大回転数	6,500rpm
最大RCF	2,234xg (1.5/2.0mLチューブ用ローター)、 2,182xg(0.2mL 8連PCRチューブ用ローター)
加速時間	4秒
減速時間	2秒
遠心時間	モード切替スイッチにより選択 ショートモード：12秒 連続モード：15分（リッドを開けた段階で停止）
サイズ (W×D×H)	150×150×103mm
重量	650g
電源	100-240V、50/60Hz、20W

カタログ No.

BMEGYR0001 1年保証

希望販売価格

¥53,000 *キャンペーン対象外

■ 構成：本体、ローター（2種）、ローター交換用スパナ、ACアダプター、操作マニュアル、保証書

チューブ用卓上遠心機

Force Mini™

Labnet
Labnet International, Inc.

- ◆ 1.5ml/2.0mlチューブ用ローター（8本掛け）と0.2ml 8連チューブ用ローター（4本掛け）が付属しているので、各容量のチューブを遠心することができます。

MAX
2,000 xg

収容本数	1.5ml/2.0mlチューブ×8本 または0.2ml 8連チューブ×4本 または 0.2mlシングルチューブ×32本
最大回転数	6,000rpm
最大遠心力	2,000×g
サイズ（D×W×H）	155×132×110mm
重量	0.75kg
電源	115V、50/60Hz、65mA

カタログ No.

SBC-140 1年保証

希望販売価格

¥70,900

キャンペーン中の参考価格

→ ¥56,720

- 構成：Force Mini本体、電源ケーブル、0.2mlチューブ用アダプター×8、0.4/0.6mlチューブ用アダプター×8、1.5/2.0mlチューブ用ローター、0.2ml 8連チューブ用ローター、マニュアル、保証書



動画
動画はこちら



プライスダウン実施商品のお知らせ

さまざまな商品をお得な価格でご提供いたします。

アウトレット商品

数量限定で当社で販売を終了した商品、メーカーで製造を中止した商品をお得な価格でご提供します。

詳しくは当社ホームページのアウトレット掲載品ページもしくは右記QRコードからご確認下さい。

アウトレットページ： <https://www.bmbio.com/shop/pages/bmoutlet.aspx>



小型ボルテックスミキサー

MX-S ボルテックスミキサー

BIOLOGIX

アダプターごとチューブを外さずボルテックス（※アクセサリーのロッド&アダプター使用時）

- ◆ スピードレンジ：最大2500rpm
- ◆ オペレーションモード：固定もしくは連続
- ◆ さまざまなチューブが適応する豊富なアダプターやアクセサリー類（別売）

カタログ No.

01-1101 

希望販売価格

¥49,700

キャンペーン中の参考価格

➔ ¥39,760

■ 構成：MX-S本体、電源ケーブル、アダプター（01-1191）マニュアル、保証書

● MX-S ボルテックスミキサー用スタンダードトップカップ

カタログ No.

01-1191

希望販売価格

¥2,400

*キャンペーン対象外

包装：1個（1個×1パック）

■ アプリケーション

	固定（高速）	連続（低速）		固定（高速）	連続（低速）
01-1191（標準付属品）	●	●	01-1193+01-1136	●	
01-1192+01-1131	●		01-1193+01-1131		●
01-1192+01-1132	●		01-1193+01-1132		●
01-1192+01-1133	●		01-1193+01-1133		●
01-1192+01-1134	●		01-1193+01-1134		●
01-1192+01-1135	●		01-1193+01-1135		●

■ アクセサリー

チューブアダプター（48本）



カタログNo.

01-1131

希望販売価格

¥5,100

包装：1個（1個×1パック） 大箱包装：なし

- ・Φ6mmテストチューブ×48本用アダプター
- ・01-1192または01-1193と共に使用

チューブアダプター（15本）



カタログNo.

01-1132

希望販売価格

¥5,100

包装：1個（1個×1パック） 大箱包装：なし

- ・Φ10mmテストチューブ×15本用アダプター
- ・01-1192または01-1193と共に使用

チューブアダプター（12本）



カタログNo.

01-1133

希望販売価格

¥5,100

包装：1個（1個×1パック） 大箱包装：なし

- ・Φ12mmテストチューブ×12本用アダプター
- ・01-1192または01-1193と共に使用

チューブアダプター（8本）



カタログNo.

01-1134

希望販売価格

¥5,100

包装：1個（1個×1パック） 大箱包装：なし

- ・Φ16mmテストチューブ×8本用アダプター
- ・01-1192または01-1193と共に使用

チューブアダプター（8本）



カタログNo.

01-1135

希望販売価格

¥5,100

包装：1個（1個×1パック） 大箱包装：なし

- ・Φ20mmテストチューブ×8本用アダプター
- ・01-1192または01-1193と共に使用

プラットフォームパッド



カタログNo.

01-1136

希望販売価格

¥1,400

包装：1個（1個×1パック） 大箱包装：なし

- ・直径99mm以下のチューブ用
- ・01-1193と共に使用

吸引フット



カタログNo.

01-1137

希望販売価格

¥1,000

包装：1個（1個×1パック） 大箱包装：なし

- ・ゴム製吸引フット
- ・本体の足に使用すればより安定に使用可能

注意：使用するには4つ必要となります。

ホールディングロッド



カタログNo.

01-1192

希望販売価格

¥12,500

包装：1個（1個×1パック） 大箱包装：なし

- ・チューブアダプター用ホールディングロッド

ユニバーサルトッププレート



カタログNo.

01-1193

希望販売価格

¥4,200

包装：1個（1個×1パック） 大箱包装：なし

- ・ユニバーサルトッププレート（Φ100mm）



01-1191



ボルテックスミキサー

BenchMixer™

BenchMixer™ XL
マルチチューブボルテクサーBenchMixer™ XLQ
チューブボルテクサー

BenchMixer™ XLはチューブ、フラスコ、バイアル、シリンダー内の混合をハンズフリーで行えるように設計されたヘビーデューティーボルテックスミキサーです。精密にバランスされた駆動システムには、ガタつきのない動作と最小限の振動で最大2,500rpmの正確で再現性のある速度を実現する特大モーターが搭載されています。プログラム可能なパルス機能は、時間を指定したインターバルミキシングを可能にし、攪はん効率を向上させます。

30×17.8cmのプラットフォームは、様々な標準的なチューブラックに対応します。また、BenchMixer™ XLは実験室で一般的に使用されているほとんどの種類の容器に簡単に適合させることができます。

BenchMixer™ XLQは、QuEChERS法やその他のサンプル前処理法での使用を目的に設計されたものです。50mlチューブを水平に、15mlと1.5/2.0mlチューブを垂直にセットできるラックが付属しています。

- ◆ ハンズフリー、多サンプルボルテクシング
- ◆ 最大2,500rpm
- ◆ 各種チューブ、フラスコ、プレート対応のアクセサリ
- ◆ インターバルミキシングのためのパルスプログラム
- ◆ ほとんどのチューブラックに対応
- ◆ QuEChERS法ラックスターターキットが付属しています (BV1010-TSTのみ)

● BenchMixer™ XL マルチチューブボルテクサー

BV1010 1年保証

希望販売価格
¥832,000

キャンペーン中の参考価格

➔ ¥665,600

● BenchMixer™ XLQ チューブボルテクサー

BV1010-TST 1年保証

希望販売価格
¥815,000

キャンペーン中の参考価格

➔ ¥652,000

- 構成：BenchMixer™ XL/XLQ本体、50×12mm チューブラック (BV1010)、7×50ml チューブラック、50×15ml チューブラック、50×1.5/2.0ml チューブラック (BV1010-TST)、電源コード、マニュアル、保証書

スピード設定範囲	500~2,500rpm
タイマー設定範囲	1分~99時間59分
振とう径	3.6mm
プラットフォームサイズ	300×178mm
外寸 (W×D×H)	385×235×420mm
重量	13kg
電源	100-240V、50-60Hz、60W



カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格
BV1010-00	Foam Sheet, no holes (1 each)		¥11,400
BV1010-05 *	チューブラック 96本×0.5ml (8mm)		¥11,400
BV1010-1520	チューブラック 50本×1.5/2.0ml (10mm)		¥11,400
BV1010-12	チューブラック 50本×12mm		¥11,400
BV1010-13	チューブラック 50本×13mm		¥11,400
BV1010-150	チューブラック 50本×15ml (16.5mm)	1個	¥11,400
BV1010-500	チューブラック 15本×50ml (29mm)		¥11,400
BV1010-25	チューブラック 15本×25mm		¥11,400
BV1010-MP	ラック マイクロプレート (3枚まで) 用		¥43,400
BV1010-MP02	ラック 96本×0.2mlチューブ用		¥11,600
BV1010-50HQ	チューブラック 7×50ml QuEChERS, horizontal		¥11,000

* BV1010-05 は、BV1010-MP と組み合わせて使用

* キャンペーン対象外

96 ウェルマイクロプレートウォッシャー

SMARTWASHER™ 96



ELISA等の吸光測定の前処理でパワフルにその力を発揮します
ELISAプレートを高速、正確、信頼性のある準備を行う事が可能

- ◆ 吸引ニードルも正確にコントロール可能
 - ・ 正確性：0.1mm
 - ・ 最小残液量：≤1μL/ウェル
- ◆ 自動リンス機能によるクロスコンタミネーションを最小限に抑制
- ◆ 100種類のプログラムをカスタマイズ可能
- ◆ 廃液ボトルに上限センサー搭載
- ◆ 洗浄プロトコルはメモリースティック等に転送可能




研究には柔軟性が必要ですが、SmartWasher™ 96 はそれを提供します。この全自動ウォッシャーは、U、V、C、または平底のフルプレート、部分プレート、ストリップに対応しています。複数の吸引ポイント設定により、吸引後のウェル内の残留液体を最小限に抑えることができます。分注量、吸引時間、ソーク振とうサイクル、振とう速度など、すべてのパラメータは 4.3 インチの大型 LCD ディスプレイとキーパッドで簡単にプログラムできます。最大 100 の洗浄プロトコルを SmartWasher™ 96 に保存し、必要なときに呼び出したり、フラッシュドライブを使って装置間で転送したりすることが可能です。

洗浄ボトル 2 本、リンスボトル 1 本、廃液ボトル 1 本が付属しています。すべてのボトルにレベルセンサーを搭載し、液が少なくなったとき、または廃液ボトルの場合は空にする必要があるときに、ユーザーに警告を発します。また、自動洗浄機能により、ニードルと洗浄ヘッドがブライミングされ、クロスコンタミネーションや目詰まりを防止します。

8 チャンネルと 12 チャンネルのウォッシュヘッドが別用意されており、どちらの向きのプレートにも対応します。透明なアクリル製シールドが洗浄エリアを囲み、プレートを可視化することができます。万一、液体がこぼれたり、漏れたりした場合は、トレー上の傾斜を持ったウェルにより、すぐに液体を除去し、クロスコンタミネーションを防止します。

SmartWasher™ 96 は、SmartReader™ 96 マイクロプレート吸光光度計やその他の一般的なプレートリーダーのパートナーとして最適です。

マルチプル吸引ポイント設定が可能で（最大3ポジション）、異なるタイプのプレートにも最適化された吸引が可能です。また、全てのウェル形状にも対応可能です。

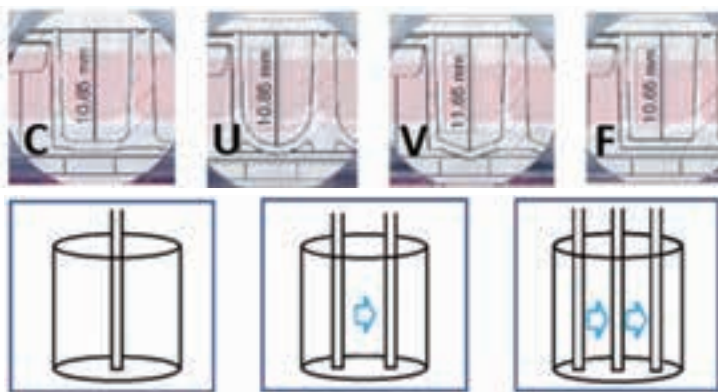

ディスプレイサイズ	4.3-inch LCD ディスプレイ
洗浄ニードルヘッド（別売）	8/12チャンネル
洗浄モード	1/2/3 ポイント吸引
マイクロプレート適合性	96wells
残液量	≤ 1μl (各well)
排出液量範囲	50μl - 2000 μl
洗浄サイクル数	1 ~ 99 サイクル
登録可能プログラム数	100 programs
リンス機能時間設定	00 : 00 ~ 03 : 59 (mm : ss)
ソーク/シェイク時間設定	00 : 00 ~ 99 : 00 (mm : ss)
ウォッシュボトル 液量レベル警告機能	有（洗浄、リンスボトルに残量センサー搭載）
洗浄溶液チャンネル数	3 ボトル
廃液ボトル液量レベル警告機能	ボトル満了時に警告有
廃液吸引	可能
サイズ (W×D×H)	345×460×200 mm
重量	11.5kg

● Accuris SmartWasher™ 96 ウェルマイクロプレートウォッシャー

カタログ No.

MW9600 **1年保証** 希望販売価格 ~~¥1,290,000~~ → **¥1,032,000** キャンペーン中の参考価格

■ 構成：本体、電源コード、マニュアル、保証書

カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格
MW9600-WSHB	スマートウォッシャー用洗浄ボトル	1式	¥42,900
MW9600-WSTB	スマートウォッシャー用廃液ボトル	1式	¥42,900
MW9600-8CM	スマートウォッシャー用ニードルヘッド 8ch	1式	¥87,100
MW9600-12CM	スマートウォッシャー用ニードルヘッド 12ch	1式	¥96,000

* キャンペーン対象外

* 当ページ掲載商品は包装：1 式、大箱包装：なしです。 * キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

ラボ用アスピレーター

ASPIRE™



ASPIRE™ はメンテナンスフリーな
ポンプ内蔵型アスピレーターでコンパクトながら、
十分な安定性があります。
吸引圧力は調節も可能です。
圧力計は見やすい位置に表示され、
常時モニタリングできます。

- ◆ 真空ポンプ内蔵
- ◆ コンパクトなデザイン
- ◆ 圧力調整可能
- ◆ 分かりやすい圧力
- ◆ 安全で正確な吸引



ASPIRE™は、幅広いアスピレーション用途に対応しており、組織培養容器やプレートからの培地の除去、上清の除去などが可能です。

人間工学に基づいたハンドコントローラーが付属しており、200～300 μ lの標準的な使い捨てピペットチップに適合します。ハンドコントローラーとアダプターはPOM（ポリオキシメチレン）製で、オートクレーブ可能です。

ポリカーボネート製のボトルには、信頼性の高いオーバーフロー保護バルブが組み込まれています。これにより、液体がボトル上限に達した時にチューブが自動的に閉じられ、吸引をストップすることができます。また、交換可能なインラインフィルターが、ボトルから侵入する汚染物質や湿気からポンプを保護します。

ハンドコントローラーは人間工学に基づいたデザインで、長時間でも快適に使用することができます。ボタンを押すと吸引します。パスツールピペット、セロロジカルピペットに対応し、さらに2つのアクセサリーピペット・コーンが付属しており、1つは200/300 μ lのピペットチップに対応したコーン、もう1つは細かい吸引が可能な細いステンレス製のキャピラリー用です。

最大吸引量	14mL/秒
最大フロー	15L/分
真空範囲	-30～-750mbar
ノイズレベル	59.6db
真空ポンプ	オイルフリーピストン
サイズ	240×200×340mm
重量	2.2Kg
電源	115V

カタログ No.

V0020 1年保証

希望販売価格

¥272,000

キャンペーン中の参考価格


→ ¥217,600

■ 構成

- ・真空ポンプ内蔵ベース
- ・回収ボトル（2L、ポリカーボネート製）
- ・抗菌・疎水性フィルター
- ・シリコンチューブ
- ・ハンドヘルド真空コントローラー（A）
- ・シングルチャンネル用アダプター（200 μ l/300 μ l ピペットチップ用）（B）
- ・シングルチャンネル用ステンレス製アダプター（40mm）（C）
- ・マニュアル
- ・保証書

【オプション（別売）】

- ・シングルチャンネル用ステンレス製アダプター（80mm）（D）
- ・8チャンネル用ステンレス製アダプター（E）
- ・8チャンネル用アダプター（200 μ l/300 μ l ピペットチップ用）（F）

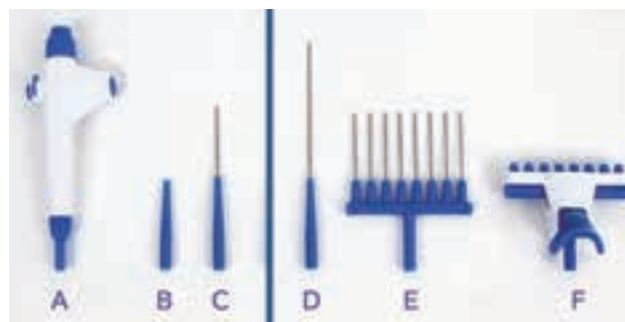

カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格
V1002-1SL	Aspire™ アスピレーター用シングルチャンネルアダプター（80mm）（D）	1個	¥9,800
V1002-S8	Aspire™ アスピレーター用8チャンネルアダプター（ステンレスノズル）（E）	1個	¥37,700
V1002-8	Aspire™ アスピレーター用8チャンネルアダプター（200 μ Lチップ用）（F）	1個	¥61,800
V1002	Aspire™ アスピレーター用ハンディーバキュームコントローラー（シングルチャンネルアダプター付）	1式	¥76,800
V0020-F1	Aspire™ アスピレーター用疎水性フィルター	1個	¥8,600
V0020-QD	Aspire™ アスピレーター用クイックディスコネクションキット	1式	¥38,000
V0020-BOT	Aspire™ アスピレーター用回収ボトル	1式	¥41,200
V0020-TB	Aspire™ アスピレーター用延長チューブセット（1m）	1式	¥8,300
V0020-SG	Aspire™ アスピレーター回収ボトル用O-ring	1個	¥8,300

*キャンペーン対象外

セルカウンター

C200FL 自動セルカウンター

RWD



RWD 蛍光セルカウンター C200FL は、インテリジェント画像認識と先進的な光学イメージング技術を組み合わせた細胞分析システムであり、精密な細胞数カウントを実現します。独自のインテリジェントアルゴリズムにより生細胞と死細胞を効果的に識別し、わずか数秒で迅速なイメージングと正確なカウントを可能にします。アプリストイルの計測プログラムはワンクリックで起動でき、サンプルを自動ロードしてカウントを行います。カウント後は細胞数、生存率、凝集率、増殖曲線などの情報をエクスポートすることが可能です。C200FLソフトウェアシステムのデータ管理・制御機能はFDA21CFR Part 11に完全準拠しており、細胞治療、バイオ医薬品、免疫学、ワクチン開発、腫瘍学研究、幹細胞、代謝研究などの分野における細胞分析に適しています。

モデル	C200FL
倍率、解像度	5×、5.0 Megapixel
蛍光パラメーター	AO/GFP：Ex: 480/30nm, Em: 535/40nm PI/RFP：Ex: 525/30nm, Em: 590LP
細胞サイズ	3-180 μm (推奨: 5-30 μm)
細胞濃度	$1 \times 10^4 - 3 \times 10^7/\text{mL}$
計測エリア	1.72mm×1.3mm (1-3ゾーン)
計測時間	5秒/サンプル (明視野)
保存容量	500G
ディスプレイ	10.1インチ LCDタッチスクリーン
サイズ (WxDxH)	300×254×420mm
重量	11Kg
電源	100-240V、50/60Hz、2.5A

● C200FL自動セルカウンター

カタログ No.

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

C200FL 1年保証 ¥1,999,000 → **¥1,592,000**

■ 構成：本体、ACアダプター、カウンティングスライド (50枚)、トリパンブルー溶液 (1mL)、USBメモリー、マニュアル、保証書

● カウンティングスライド (C200FL用)

カタログ No.


希望販売価格

DS-66 50枚(1枚x50パック) **¥33,000** *キャンペーン対象外

C200FL用ディスプレイカウンティングスライドは1スライドに6サンプルセット可能です。



6チャンネル自動サンプリング

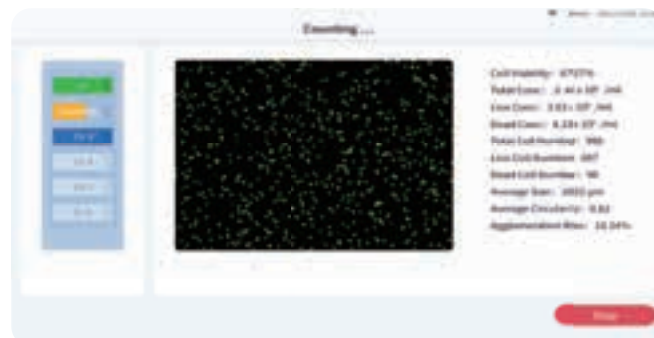

カウント結果をリアルタイムに表示

機器

ヒベット

チップ

リザーバー

チューブ・プレート

細胞培養

アウトレット



PCR サーマルサイクラー

DQ24 PlusデジタルPCRシステム



ドロップレット形成・PCR反応・蛍光検出・解析を一体化したオールインワンデジタルPCRシステム

- ◆ オールインワン設計
- ◆ Sniper社独自のVibroJect®テクノロジーによるドロップレット形成
温度等の周囲の環境に影響されことなく均一なドロップレット形成が可能
- ◆ 簡単操作
サンプル・消耗品類をセットしプログラム設定後RUNボタンをクリックするだけ
- ◆ フレキシブルなサンプル数
最大16サンプル、24サンプルの2種類の消耗品オプション
- ◆ 最大6チャンネル蛍光検出
最大6色の蛍光を検出することが可能。
ほとんどのqPCR用蛍光色素に対応
(ROXをリファレンスダイとして使用する場合、
ターゲット検出は5色となります)
- ◆ ドロップレットサイズの設定が可能
 - ・標準モード
サンプル量20 μ L、ドロップレット数 ~23,000
絶対定量的遺伝子発現解析、コピー数検出、リキッドバイオプシー
メチル化解析、NGSライブラリー定量
 - ・高解像度 (オプション)
サンプル量15 μ L、ドロップレット数 37,000~45,000
非侵襲性出生前検査 (NIPT)
 - ・高感度 (オプション)
サンプル量40 μ L、ドロップレット数 9,000~11,000
希少変異解析
- ◆ マルチ温度制御モード (オプション)
サンプルプレートごとの温度勾配設定が可能

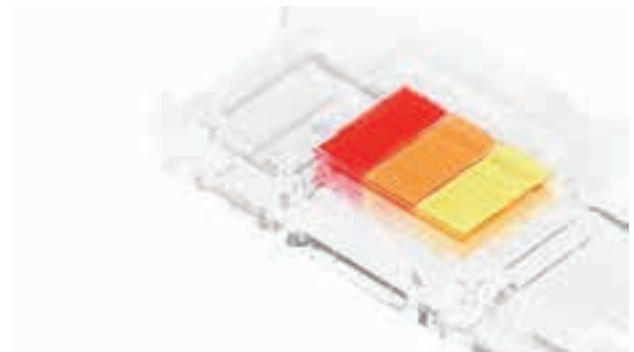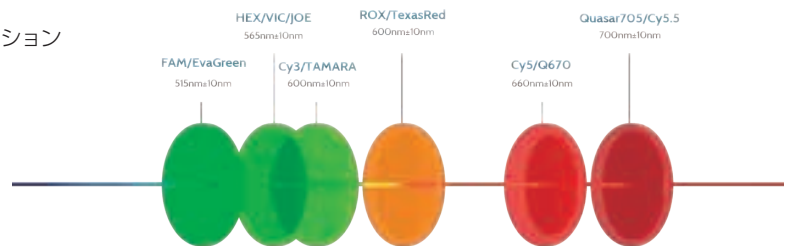

サイズ (L×W×H)	495×500×560mm
重量	60kg
使用環境条件	温度15-40℃、相対湿度<85%
動作電源	100-240VAC、50/60Hz、7.3A
汚染防止設計	ファンフィルターユニット、UV ランプ
ドロップレット生成方式	振動インジェクション
反応容積	20 μ L (標準モード)
サンプル数	1-24サンプル同時検出可能
有効ドロップレット数	23,000個 (24サンプル)、 28,000個 (16サンプル)

検出時間	約1.5時間
励起光源	長寿命メンテナンスフリーLED光源
対話モード	17.3インチ内蔵タッチパネル
温度制御範囲	3-99℃
温度制御精度	±0.1℃
検出方法	色素法/プローブ法/ワンステップ法
データ品質管理	単独な QC ソフトウェアモジュール付き、各ドロップレットの自動品質管理、 手動での表示や変更または保存操作可能、偽陽性や偽陰性の回避

カタログ No.

希望販売価格

RM001008E



¥16,980,000 *キャンペーン対象外

機器

ビヘット

チップ

リザーバー

チューブ・プレート

細胞培養

アウトレット



プラチナローリテンションチップ

BMBio
ST (Standard & Stable)

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

プラチナローリテンションチップはあらゆる点から“超低吸着・低残液”を追求し、成型されたチップです。不純物の無いオリジナルバージンポリプロピレンを使用し、原材料を特殊配合しておりますので、非常に滑らかな表面を実現しました。また、独特のモールド設計及び製造工程により、さらにその滑らかさに磨きをかけています。チップ自体の透明度も非常に高く、ピペットノズルにもスムーズにフィットします。希少なサンプルの分注に最適です。是非、今ご使用のチップと比べて下さい。



ピペット適合表は
こちら

[https://www.bmbio.com/
pipette_compatibility/BM.html](https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)



-10μl



全長：31.6mm

◆ 10μlショートのスタンダードタイプです。



原寸大



カタログ No.

希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BM2010 未滅菌 包装：1,000本 (1,000本×1パック) 大箱包装：1,000本×20 バルク ￥4,100 → ￥2,870 @¥2.9	
BM2011 未滅菌 包装：960本 (96本×10ラック) 大箱包装：960本×5 ラック ￥9,500 → ￥6,650 @¥6.9	
BM2012 電子滅菌 包装：960本 (96本×10ラック) 大箱包装：960本×5 ラック ￥11,400 → ￥7,980 @¥8.3	

-10μl



全長：45.0mm

◆ 10μlロングのスタンダードタイプです。



原寸大



カタログ No.

希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BM2016 未滅菌 包装：1,000本 (1,000本×1パック) 大箱包装：1,000本×20 バルク ￥4,100 → ￥2,870 @¥2.9	
BM2017 未滅菌 包装：960本 (96本×10ラック) 大箱包装：960本×5 ラック ￥9,500 → ￥6,650 @¥6.9	
BM2018 電子滅菌 包装：960本 (96本×10ラック) 大箱包装：960本×5 ラック ￥12,100 → ￥8,470 @¥8.8	

-200μl



全長：50.8mm 目盛：10, 50, 100μl

◆ 200μl先端テーパーで目盛がありサンプリング時の容量目視確認に最適です。



原寸大



カタログ No.

希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BM2050 未滅菌 包装：1,000本 (1,000本×1パック) 大箱包装：1,000本×20 バルク ￥4,100 → ￥2,870 @¥2.9	
BM2051 未滅菌 包装：960本 (96本×10ラック) 大箱包装：960本×5 ラック ￥8,900 → ￥6,230 @¥6.5	
BM2052 電子滅菌 包装：960本 (96本×10ラック) 大箱包装：960本×5 ラック ￥11,500 → ￥8,050 @¥8.4	

-1000μl




全長：78.0mm

◆ -1000μl先端テーパーで大きい分注容量で起こりやすい残液を極力残すことなく吐出できます。



原寸大

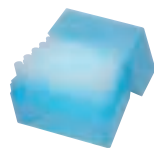

カタログ No.

希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BM2070 未滅菌 包装：1,000本 (1,000本×1パック) 大箱包装：1,000本×5 バルク ￥4,400 → ￥3,080 @¥3.1	
BM2071 未滅菌 包装：1,000本 (100本×10ラック) 大箱包装：1,000本×5 ラック ￥9,900 → ￥6,930 @¥6.9	



チップ

プラチナローリテンションフィルター付チップ

BMBio
ST (Standard & Stable)

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

オートクレーブ不可

ピペット適合表は
こちら
[https://www.bmbio.com/
pipette_compatibility/BM.html](https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)


-10μl

先端
ストレート 全長: 31.6mm

◆ -10μlショートのスチンダードタイプです。



原寸大



カタログ No.

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

BM3010

¥21,800

→ **¥15,260** @¥15.9

包 装: 960本 (96本×10ラック)

ラック

大箱包装: 960本×5

-10μl

先端
テーパー 全長: 45.0mm

◆ -10μlロングのスチンダードタイプです。



原寸大



カタログ No.

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

BM3080

¥22,500

→ **¥15,750** @¥16.4

包 装: 960本 (96本×10ラック)

ラック

大箱包装: 960本×5

-10μl

先端
テーパー 全長: 45.7mm

◆ 主にeppendorf社対応のロングタイプです。



原寸大



カタログ No.

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

BM3000

¥21,800

→ **¥15,260** @¥15.9

包 装: 960本 (96本×10ラック)

ラック

大箱包装: 960本×5

-20μl

先端
テーパー 全長: 50.8mm

◆ 液切れのいい先端テーパーカットタイプです。



原寸大



カタログ No.

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

BM3020

¥21,800

→ **¥15,260** @¥15.9

包 装: 960本 (96本×10ラック)

ラック

大箱包装: 960本×5

-100μl

先端
テーパー 全長: 50.8mm 目盛: 10, 50, 100μl

◆ 液切れのいい先端テーパーカット&目盛付タイプです。



原寸大



カタログ No.

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

BM3030

¥21,800

→ **¥15,260** @¥15.9

包 装: 960本 (96本×10ラック)

ラック

大箱包装: 960本×5

-200μl

先端
テーパー 全長: 50.8mm 目盛: 10, 50, 100μl

◆ 液切れのいい先端テーパーカット&目盛付タイプです。



原寸大



カタログ No.

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

BM3040

¥21,800

→ **¥15,260** @¥15.9

包 装: 960本 (96本×10ラック)

ラック

大箱包装: 960本×5

-1000μl

先端
テーパー 全長: 78.0mm

◆ 液切れのいい先端テーパーカットタイプです。



原寸大



カタログ No.

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

BM3070

¥21,800

→ **¥15,260** @¥15.3

包 装: 1,000本 (100本×10ラック)

ラック

大箱包装: 1,000本×5


チップ

スタンダードチップ -10 μ L・200 μ L・1000 μ L 詰め替え

chanshow®

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

- ◆ ロングタイプ
- ◆ 高い透明度
- ◆ ユニバーサルフィット
- ◆ 滅菌済
- ◆ 詰め替えタイプ
- ◆ オートクレーブ可能 (121℃、15 分)
- ◆ DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, Pyrogen, endotoxin Free
- ◆ 材質：P.P
- ◆ 色：ナチュラル

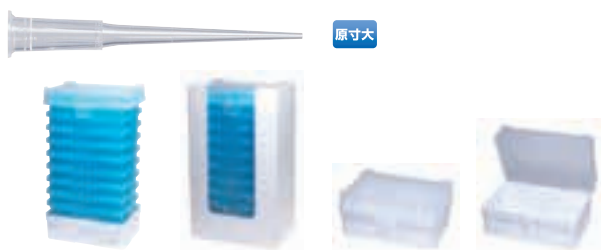-10 μ L 全長：39.2mm 目盛：2 μ L-200 μ L 全長：59.3mm 目盛：20, 50 μ L-1000 μ L 全長：101.8mm 目盛：200, 500, 1000 μ L

コスパで選ぶなら
このチップ!

カタログ No.

希望販売価格

16.106.0101 滅菌

¥3,600

包装：960本 (96本×10プレート) 詰め替え 大箱：960本×10

● 10 μ L詰め替え用空ラック (16.106.0101用)

29.001.0012 未滅菌

¥2,200

包装：10個 (10個×1パック) 空ラック 大箱：10個×5

*キャンペーン対象外

カタログ No.

希望販売価格

16.106.0106 滅菌

¥3,600

包装：960本 (96本×10プレート) 詰め替え 大箱：960本×10

● 200 μ L詰め替え用空ラック (16.106.0106用)

29.001.0013 未滅菌

¥2,200

包装：10個 (10個×1パック) 空ラック 大箱：10個×5

*キャンペーン対象外

カタログ No.

希望販売価格

16.106.0109 滅菌

¥1,500

包装：384本 (96本×4プレート) 詰め替え 大箱：384本×20

● 1000 μ L詰め替え用空ラック (16.106.0109用)

29.001.0014 未滅菌

¥2,600

包装：10個 (10個×1パック) 空ラック 大箱：10個×5

*キャンペーン対象外

チップ

フィルター付きチップ -10 μ L・20 μ L・100 μ L・200 μ L・1000 μ L ラック

chanshow®

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

オートクレーブ不可

- ◆ フィルター付ロングタイプ
- ◆ 高い透明度
- ◆ ユニバーサルフィット
- ◆ 滅菌済
- ◆ オートクレーブ不可
- ◆ DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, Pyrogen, endotoxin Free
- ◆ 材質: P.P
- ◆ 色: ナチュラル

-10 μ L全長: 39.2mm 目盛: 2 μ L

原寸大



カタログ No.

希望販売価格

16.101.2101 滅菌**¥11,900**

包装: 960本 (96本×10ラック) ラック 大箱: 960本×5

*キャンペーン対象外

-20 μ L全長: 59.3mm 目盛: 20 μ L

原寸大



カタログ No.

希望販売価格

16.101.2102 滅菌**¥11,900**

包装: 960本 (96本×10ラック) ラック 大箱: 960本×5

*キャンペーン対象外

-100 μ L全長: 59.3mm 目盛: 20, 50 μ L

原寸大



カタログ No.

希望販売価格

16.101.2105 滅菌**¥11,900**

包装: 960本 (96本×10ラック) ラック 大箱: 960本×5

*キャンペーン対象外

-200 μ L全長: 59.3mm 目盛: 20, 50 μ L

原寸大



カタログ No.

希望販売価格

16.101.2106 滅菌**¥11,900**

包装: 960本 (96本×10ラック) ラック 大箱: 960本×5

*キャンペーン対象外

-1000 μ L全長: 101.8mm 目盛: 200, 500, 1000 μ L

原寸大



カタログ No.

希望販売価格

16.101.2109 滅菌**¥11,900**

包装: 960本 (96本×10ラック) ラック 大箱: 960本×5

*キャンペーン対象外

*希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

機器

ビヘット

チップ

リザーバー

チューブ・プレート

細胞培養

アウトレット

チップ

経済的！エコノミカルフィルター付チップ

BMBio
ECO (Economy & Ecology)

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

親水性フィルター自体がミストを保持し、エアロゾルからクロスコンタミネーションを防ぎます。
オーバーフローは防げませんので、慎重なピペティング操作を行ってください。


 ピペット適合表
 はこちら


-10μl



全長：31.6mm



カタログ No.

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

GF-10G-R ￥13,900 → ￥9,730 @¥10.1

960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装：960本×5

-10μl



全長：45.0mm



カタログ No.

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

GF-10GXL-R ￥18,900 → ￥13,230 @¥13.8

960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装：960本×5

-10μl



全長：45.7mm



カタログ No.

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

GF-10E-R ￥13,900 → ￥9,730 @¥10.1

960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装：960本×5

-20μl



全長：50.8mm



カタログ No.

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

GF-20-R ￥13,900 → ￥9,730 @¥10.1

960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装：960本×5

-100μl



全長：50.8mm 目盛：10, 50, 100μl



カタログ No.

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

GF-100-R ￥13,900 → ￥9,730 @¥10.1

960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装：960本×5

-200μl



全長：50.8mm 目盛：10, 50, 100μl



カタログ No.

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

GF-200-R ￥13,900 → ￥9,730 @¥10.1

960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装：960本×5

-1000μl



全長：78.0mm



カタログ No.

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

GF-1000-R ￥13,900 → ￥9,730 @¥9.7

1,000本 (100本×10ラック) ラック 大箱包装：1,000本×5

機器

ピペット

チップ

リザーバー

チューブ・プレート

細胞培養


アウトレット

QSP
Quality Scientific Plastics

TOP OF THE
TIP

ローリテンションチップ

ローリテンションチップの特徴

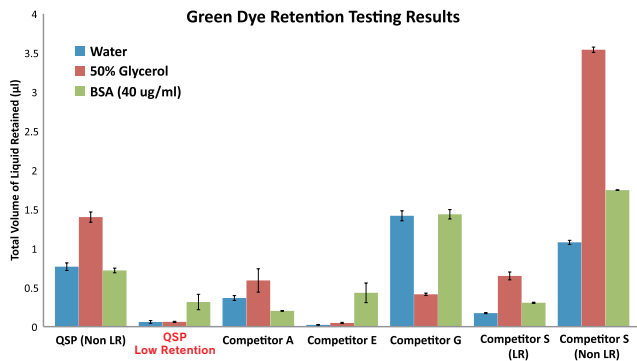

Total volumes of liquid retained by each tip for the different solutions tested.
QSP Low Retention tips retained less volumes compared to the non-LR style and most products from other major manufacturers.


Total Retained Volumes

Tip Tested/Solution	Water	50% Glycerol	BSA (40 ug/ml)
QSP (normal)	0.77 ± 0.05	1.40 ± 0.07	0.72 ± 0.03
QSP Low Retention	0.06 ± 0.02	0.06 ± 0.01	0.32 ± 0.10
Competitor A	0.37 ± 0.03	0.59 ± 0.15	0.20 ± 0.00
Competitor B	0.02 ± 0.00	0.05 ± 0.01	0.43 ± 0.13
Competitor G	1.42 ± 0.06	0.41 ± 0.02	1.44 ± 0.06
Competitor S (LR)	0.17 ± 0.01	0.65 ± 0.05	0.31 ± 0.01
Competitor S (Non LR)	1.08 ± 0.03	3.54 ± 0.03	1.75 ± 0.00

A summary for total volumes of liquid retained by each tip for the different solutions tested.
QSP Low Retention tips retain less than 0.5 μl from a 200 μl dispensing with various solutions including high viscosity 50% glycerol.

QSP のラックシステム

2009年より「EARTH FRIENDLY」をコンセプトとした詰め替え式チップ「Q-One®」は、Tラックシリーズ、ファーストクラスフィルター付チップのラックを使用できます。

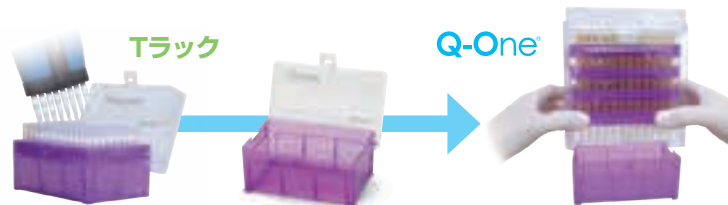

使いやすい Tラック



ラック包装はイーザーピールオフシュリンクを採用

シュリンク中心にある帯を片手で引っ張り



チップ

ローリテンションチップ〈サンプル低吸着・低残液〉

QSP
Quality Scientific Plastics

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

-10μl

102シリーズ

ロング
先端
ストレート目盛付
100

全長：46.0mm 目盛：2, 5, 10, 20μl

30%
OFF

カタログ No.	包装	大箱包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
TLR102-Q	未滅菌 1,000本 (1,000本×1パック)	1,000本×10	¥3,100 →	¥2,170 @¥2.2
TLR102R-Q	未滅菌 960本 (96本×10ラック)	960本×5	¥6,500 →	¥4,550 @¥4.7
TLR102RS-Q	電子滅菌 960本 (96本×10ラック)	960本×5	¥6,900 →	¥4,830 @¥5.0
TLR102RL-Q	未滅菌 960本 (96本×5プレート×2パック)	960本×5	¥5,100 →	¥3,570 @¥3.7
TLR102RLS-Q	電子滅菌 960本 (96本×5プレート×2パック)	960本×5	¥5,900 →	¥4,130 @¥4.3

-200μl

070シリーズ

先端
デューパー

全長：51.0mm



カタログ No.	包装	大箱包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
TLR070-Q	未滅菌 1,000本 (1,000本×1パック)	1,000本×10	¥2,800 →	¥1,960 @¥2.0
TLR070R-Q	未滅菌 960本 (96本×10ラック)	960本×5	¥6,000 →	¥4,200 @¥4.4
TLR070RS-Q	電子滅菌 960本 (96本×10ラック)	960本×5	¥6,500 →	¥4,550 @¥4.7
TLR070RL-Q	未滅菌 960本 (96本×5プレート×2パック)	960本×5	¥5,000 →	¥3,500 @¥3.6
TLR070RLS-Q	電子滅菌 960本 (96本×5プレート×2パック)	960本×5	¥5,800 →	¥4,060 @¥4.2

-300μl

106シリーズ

先端
ストレート

全長：59mm 目盛：10, 50, 100, 200μl



カタログ No.	包装	大箱包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
TLR106-Q	未滅菌 1,000本 (1,000本×1パック)	1,000本×10	¥3,400 →	¥2,380 @¥2.4
TLR106R-Q	未滅菌 960本 (96本×10ラック)	960本×5	¥8,100 →	¥5,670 @¥5.9
TLR106RS-Q	電子滅菌 960本 (96本×10ラック)	960本×5	¥8,200 →	¥5,740 @¥6.0
TLR106RL-Q	未滅菌 960本 (96本×5プレート×2パック)	960本×5	¥7,700 →	¥5,390 @¥5.6
TLR106RLS-Q	電子滅菌 960本 (96本×5プレート×2パック)	960本×5	¥7,800 →	¥5,460 @¥5.7

-1250μl

112-NXLシリーズ

ロング

先端
デューパー目盛付
100

全長：89.0mm 目盛：100, 200, 500, 1000μl



カタログ No.	包装	大箱包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
TLR112NXL-Q	未滅菌 1,000本 (1,000本×1パック)	1,000本×10	¥4,300 →	¥3,010 @¥3.0
TLR112NXLR-Q	未滅菌 960本 (96本×10ラック)	960本×5	¥8,400 →	¥5,880 @¥6.1
TLR112NXLRs-Q	電子滅菌 960本 (96本×10ラック)	960本×5	¥9,400 →	¥6,580 @¥6.9
TLR112NXLRL-Q	未滅菌 960本 (96本×5プレート×2パック)	960本×5	¥6,600 →	¥4,620 @¥4.8
TLR112NXRLS-Q	電子滅菌 960本 (96本×5プレート×2パック)	960本×5	¥7,700 →	¥5,390 @¥5.6

チップ

ローリテンション ファーストクラスフィルターチップ〈サンプル低吸着・低残液〉

QSP
Quality Scientific Plastics

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

オートクレーブ不可

30%
OFF

-10μl

ロング
先端
ストレート
目盛付
10

全長：46.0mm 目盛：2, 5, 10μl



原寸大

カタログ No.

TFLR102-10-Q 電子滅菌

希望販売価格

¥13,800

キャンペーン中の参考価格

¥9,660 @¥10.1

包装：960本（96本×10ラック） Tラック 大箱包装：960本×5

-20μl

先端
テーパード

全長：51.0mm



原寸大

カタログ No.

TFLR113-20-Q 電子滅菌

希望販売価格

¥13,800

キャンペーン中の参考価格

¥9,660 @¥10.1

包装：960本（96本×10ラック） Tラック 大箱包装：960本×5

-100μl

先端
テーパード

全長：51.0mm



原寸大

カタログ No.

TFLR113-100-Q 電子滅菌

希望販売価格

¥13,800

キャンペーン中の参考価格

¥9,660 @¥10.1

包装：960本（96本×10ラック） Tラック 大箱包装：960本×5

-200μl

先端
ストレート
目盛付
100

全長：50.0mm 目盛：50, 100, 200μl



原寸大

カタログ No.

TFLR140-200-Q 電子滅菌

希望販売価格

¥13,800

キャンペーン中の参考価格

¥9,660 @¥10.1

包装：960本（96本×10ラック） Tラック 大箱包装：960本×5

-300μl

先端
ストレート
目盛付
100

全長：58.4mm 目盛：10, 50, 100, 200μl



原寸大

カタログ No.

TFLR140-300-Q 電子滅菌

希望販売価格

¥13,800

キャンペーン中の参考価格

¥9,660 @¥10.1

包装：960本（96本×10ラック） Tラック 大箱包装：960本×5

-1000μl

先端
テーパード
目盛付
100

全長：89.0mm 目盛：100, 200, 500, 1000μl



原寸大

カタログ No.

TFLR112-1000-Q 電子滅菌

希望販売価格

¥13,800

キャンペーン中の参考価格

¥9,660 @¥10.1

包装：960本（96本×10ラック） Tラック 大箱包装：960本×5

ローリテンション ファーストクラスフィルター付チップ

親水性フィルター自体がミストを保持し、エアロゾルからクロスコンタミネーションを防ぎます。オーバーフローは防げませんので、慎重なピペティング操作を行って下さい。

ラック包装はイーザーピールオフシュリンクを採用

シュリンク中心にある
帯を片手で引っ張り両側に開けば
簡単にビニールを
取ることができます。使いやすい
Tラック

マニュアルピペット

Accumax Fab-LF ピペット (ライトフォースタイプ)

ACCUMAX
ACCURACY AT MAXIMUM

通常、ピペットは先端部分が円すい形になっており、摩擦によってチップをしっかり保持しています。そのため、確実なシールを得るにはピペットをチップに強く押し込む必要があり、その力は親指で加えることになります。

Accumax の FAB LF テクノロジーは、シリンダー形状のチップとシャフト機構を採用することで、こうした力を不要にし、より快適なピペッティング操作を実現します。

- ◆ 各種ライトフォースタイプのチップに適合
- ◆ 独自のマグネットアシストメカニズムの採用でより軽いピペッティングが可能
- ◆ 人間工学に基づいた重量分布
- ◆ ボリュームロック機能装備
- ◆ マルチチャンネルピペットのヘッドは360° 回転可能
- ◆ フルオートクレーパブル (121℃、20分)

1年保証

カタログ No.	Ch	容量	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
ALFV-10		0.5-10μL	¥23,500 →	¥18,800
ALFV-20		2-20μL	¥23,500 →	¥18,800
ALFV-100		10-100μL	¥23,500 →	¥18,800
ALFV-200	1	20-200μL	¥23,500 →	¥18,800
ALFV-1000		100-1000μL	¥23,500 →	¥18,800
ALFV-5000		500-5000μL	¥23,500 →	¥18,800
ALFV-10000		1000-10000μL	¥23,500 →	¥18,800
ALFM8-010		0.5-10μL	¥67,800 →	¥54,240
ALFM8-050	8	5-50μL	¥67,800 →	¥54,240
ALFM8-200		20-200μL	¥67,800 →	¥54,240
ALFM8-300		30-300μL	¥67,800 →	¥54,240

■ 構成：本体、マニュアル、保証書



動画はこちら

https://youtu.be/J7plaegu74U

従来型のピペッティング

広いシール面積と厚肉のチップにより、摩擦が大きくなる。

円錐状のシャフトは円錐状のチップに差し込まれるが、確実に止まるストッパーがないため、過剰に差し込んでしまう可能性がある。

LF (ライトフォース) 円筒形チップとシャフト

シール面積が小さい円筒形のシャフトのため、摩擦が少ない

ストッパーがあることにより、圧力のかけすぎによる詰まりが防止される。

カタログ番号	容量範囲 (μL)	容量刻み (μL)	試験容量 (μL)	正精度誤差 (±) %	精度誤差 (±) %
Single channel Pipettes					
ALFV-10	0.5-10	0.02	1	0	0
			5	0.5	0.5
			10	0.1	0.1
AFLV-20	2-20	0.02	2	-0.5	-0.5
			10	0	0
			20	0.2	0.2
ALFV-100	10-100	0.1	10	-0.1	-0.1
			50	-0.2	-0.20
			100	0.3	0.30
ALFV-200	20-200	0.2	20	-0.3	-0.3
			100	0.1	0.1
			200	0.3	0.3
ALFV-1000	100-1000	1	100	-0.2	-0.2
			500	0.1	0.1
			1000	0.2	0.2

カタログ番号	容量範囲 (μL)	容量刻み (μL)	試験容量 (μL)	正精度誤差 (±) %	精度誤差 (±) %
8 Channel Pipettes					
AFLM8-010	0.5-10	0.02	1	8	5
			5	4	2
			10	2	1
AFLM8-050	5-50	0.1	5	3	2
			25	1.5	1
			50	1	0.7
AFLM8-200	20-200	0.2	20	5	1.4
			100	1	0.40
			200	0.7	0.25
AFLM8-300	30-300	0.2	30	3	1
			150	1	0.5
			300	0.6	0.3

ここが イチオシ! BM から買うと お得宣言!

ビーエムから**ピペットパル**を購入すると**お得宣言!!**

ピペットパルどれでも まとめて **5本** 購入いただくと更にお得!!

シングルでも

マルチでも

例えば・・・
PAL-2

1本あたり

5本まとめると

¥32,000 → キャンペーン中の参考価格 ¥25,600 → **¥24,800**



例えば・・・
PAL-8-10

1本あたり

5本まとめると

¥81,000 → キャンペーン中の参考価格 ¥64,800 → **¥63,800**

PAL-12-200

1本あたり

5本まとめると

¥96,500 → キャンペーン中の参考価格 ¥77,200 → **¥76,200**

こんなに
お得!! (例) 下記の組み合わせでご購入いただくと・・・

		キャンペーン中の参考価格	5本まとめると
PAL-2	¥32,000 →	¥25,600 →	¥24,800
PAL-10	¥32,000 →	¥25,600 →	¥24,800
PAL-20	¥30,000 →	¥24,000 →	¥23,200
PAL-8-10	¥81,000 →	¥64,800 →	¥63,800
PAL-12-200	¥96,500 →	¥77,200 →	¥76,200
合計	¥271,500 →	¥217,200 →	¥212,800

5本
まとめると
**¥4,400も
お得!!**

ピペット（マニュアル）

PipetPAL® シングルチャンネルピペット

BMBio
ST (Standard & Stable)

PipetPAL®

●容易な容量設定

超精密直読式デジタルマイクロメーターを搭載しているため、容易かつ連続的に容量設定が行えます。プッシュボタン部分のノブは、安全グローブを装着したままでも容易に容量設定ができます。



●容量連続可変

片手で容量設定ができるため、不慮の容量設定ミスを防ぐことができます。



●紫外線耐性

紫外線に対し、耐久性のある材料で製造されており、紫外線照射で滅菌することができます。紫外線下に長時間置いても、プラスチックは変質せず、退色もわずかです。

●チップエジェクターを装備

チップを取り外す際、チップの様々な形状に適合させるためにエジェクターの位置を上下に調整することができます。エジェクターは洗浄が可能で、取り外しが容易です。



ここが
イチオシ!

3年保証

5本まとめた
場合の1本
あたりの価格

カタログNo.	一目盛刻み	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
PAL-2	0.002 μ l	¥32,000 →	¥25,600 → ¥24,800
PAL-10	0.02 μ l	¥32,000 →	¥25,600 → ¥24,800
PAL-20	0.02 μ l	¥30,000 →	¥24,000 → ¥23,200
PAL-100	0.2 μ l	¥30,000 →	¥24,000 → ¥23,200
PAL-200	0.2 μ l	¥30,000 →	¥24,000 → ¥23,200
PAL-1000	2 μ l	¥30,000 →	¥24,000 → ¥23,200
PAL-5000	10 μ l	¥35,000 →	¥28,000 → ¥27,200
PAL-10ml	20 μ l	¥37,000 →	¥29,600 → ¥28,800

Model	Volume [μ l]	Accuracy [%]	Precision [%]	Fit to tips
PAL-2	0.2	± 12.0	± 6.0	10 μ l
	Max. 2.0	± 2.7 ± 1.5	± 1.3 ± 0.7	
PAL-10	Min. 0.5	± 4.0	± 2.8	10 μ l
	Max. 10.0	± 1.0 ± 0.5	± 0.6 ± 0.4	
PAL-20	Min. 2	± 3.0	± 1.5	200 μ l
	Max. 20	± 1.0 ± 0.8	± 0.5 ± 0.3	
PAL-100	Min. 10	± 1.6	± 0.80	200 μ l
	Max. 100	± 0.8 ± 0.8	± 0.24 ± 0.20	
PAL-200	Min. 20	± 1.2	± 0.60	200 μ l
	Max. 200	± 0.8 ± 0.6	± 0.25 ± 0.20	
PAL-1000	Min. 100	± 1.6	± 0.40	1000 μ l
	Max. 1000	± 0.7 ± 0.6	± 0.20 ± 0.15	
PAL-5000	Min. 1000	± 0.6	± 0.25	5000 μ l
	Max. 5000	± 0.6 ± 0.5	± 0.20 ± 0.15	
PAL-10ml	Min. 1000	± 2.5	± 0.6	10000 μ l
	Max. 10000	± 0.8 ± 0.5	± 0.3 ± 0.2	

機器

ピペット

チップ

リザーバー

チューブ・プレート

細胞培養

アウトレット

ピペット (マニュアル)

PipetPAL® マルチチャンネルピペットBMBio
ST (Standard & Stable)

- 独自のノズルデザインとノズルムーブメントにより、比類なき装着を実現しました。
 - 各種マイクロプレート、PCRチューブ、PCRプレートピッチに対応
- ※ シングルチャンネルと特長は同じです。
(チップエジェクターを除く)

●360度エジェクター

ハンドルがどの方向を向いていてもチップをエジェクトすることができます。



●チップコーン

各チップコーンは個別に可動するため、チップの脱着に要する力を軽減できます。



スムーズフィット

●性能保証

全商品に出荷時の性能を保証する適合認定書がついています。適合認定書には、性能検査条件、検査データの記入された性能検査結果が含まれています。3年保証

●オートクレーブ滅菌可能

本体をまるごとオートクレーブ滅菌することができます。通常のオートクレーブ滅菌 (121℃ / 0.1Mpa / 20分) を行なった後も、点検および再校正が必要ありません。

※シャフトナットを緩めてから行って下さい。



3年保証

5本まとめた
場合の1本
あたりの価格

カタログNo.	一目盛刻み	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
8 channel			
PAL-8-10	0.1μl	¥81,000 →	¥64,800 → ¥63,800
PAL-8-50	0.5μl	¥81,000 →	¥64,800 → ¥63,800
PAL-8-200	1.0μl	¥81,000 →	¥64,800 → ¥63,800
PAL-8-300	5.0μl	¥81,000 →	¥64,800 → ¥63,800
12 channel			
PAL-12-10	0.1μl	¥96,500 →	¥77,200 → ¥76,200
PAL-12-50	0.5μl	¥96,500 →	¥77,200 → ¥76,200
PAL-12-200	1.0μl	¥96,500 →	¥77,200 → ¥76,200
PAL-12-300	5.0μl	¥96,500 →	¥77,200 → ¥76,200

Model	Volume [μl]	Accuracy[%]	Precision[%]	Fit to tips
8 channel				
PAL-8-10	Min 1	±8.0	±6.0	10μl
	5	±4.0	±2.0	
	Max 10	±2.0	±1.2	
PAL-8-50	Min 5	±4.0	±2.5	200μl
	25	±3.0	±1.2	
	Max 50	±1.6	±0.6	
PAL-8-200	Min 20	±3.0	±1.5	200μl 300μl
	100	±1.5	±0.8	
	Max 200	±1.0	±0.6	
PAL-8-300	Min 50	±1.6	±1.5	300μl
	150	±1.2	±1.0	
	Max 300	±1.0	±0.6	
12 channel				
PAL-12-10	Min 1	±8.0	±6.0	10μl
	5	±4.0	±2.0	
	Max 10	±2.0	±1.2	
PAL-12-50	Min 5	±4.0	±2.5	200μl
	25	±3.0	±1.2	
	Max 50	±1.6	±0.6	
PAL-12-200	Min 20	±3.0	±1.5	200μl 300μl
	100	±1.5	±0.8	
	Max 200	±1.0	±0.6	
PAL-12-300	Min 50	±1.6	±1.5	300μl
	150	±1.2	±1.0	
	Max 300	±1.0	±0.6	

リザーバー


BMBio リザーバー (エコノミカル)

BMBio
ECO (Economy & Ecology)

DNase, RNase, Pyrogen Free

オートクレーブ不可

- ◆ ピペットで分注作業する際の容器
- ◆ マルチチャンネルピペット (～12ch) を使用するとき便利
- ◆ ディスポーザブルタイプ
- ◆ 個装滅菌タイプと使いやすい5枚滅菌タイプ
- ◆ DNase, RNase, Pyrogen Free Certificationの発行も可能

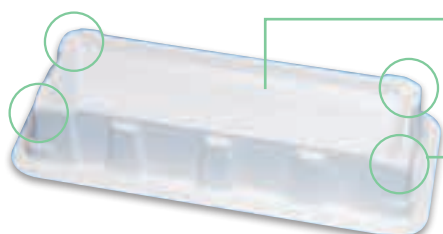★マルチチャンネル
ピペットに最適!★リーズナブル
プライス!!

目盛

各リザーバーには目盛が付いてい
ますので注ぐサンプル量の目安と
してご利用いただけます。

4コーナーに注ぎ口

4コーナーにサンプル回収用の注ぎ口があり、
リザーバーの向きを気にせず容易に回収が行えます。




V底をより深く



V底の先端部分をさらに深く
したことで、希少な少量サンプ
ルの分注・回収が行いやすくな
っています。

1レーン：25ml

25ml 目盛付

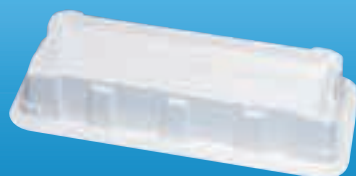

カタログ No.

BM-0850-1 電子滅菌 希望販売価格
¥12,600 → **¥8,820 @¥88.2**

キャンペーン中の参考価格


包装：100枚 (5枚×20パック) 大箱包装：—

材質：P.S

寸法：146×63×24.5mm (W×D×H)




最大容量各5mlの3レーン

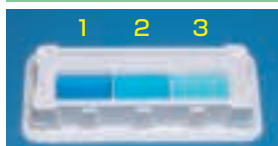

少量のサンプルを分注する際
に、各レーンにて最大5mlまで
分注が可能です。

3レーン：25ml

25ml 目盛付

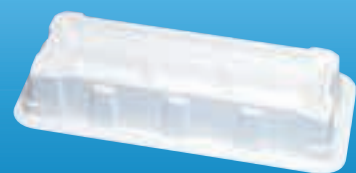

カタログ No.

BM-0853-1 電子滅菌 希望販売価格
¥13,800 → **¥9,660 @¥96.6**

キャンペーン中の参考価格

包装：100枚 (5枚×20パック) 大箱包装：—

材質：P.S

寸法：146×63×24.5mm (W×D×H)



幅広サイズの50mlリザーバー



あえて100mlリザーバーと同
サイズにすることでサンプル
液面が低くなり、安定した分注
操作が行えます。

1レーン：50ml

25,50ml 目盛付



カタログ No.

BM-0850-2 電子滅菌 希望販売価格
¥12,600 → **¥8,820 @¥88.2**

キャンペーン中の参考価格

包装：100枚 (5枚×20パック) 大箱包装：—

材質：P.S

寸法：146×82.5×29mm (W×D×H)




分注・回収しやすいスロット構造



サンプルが減ってきて溝に
集まりやすいスロット構造に
より、分注・回収が行いやす
くなっています。

1レーン：100ml

50,100ml 目盛付

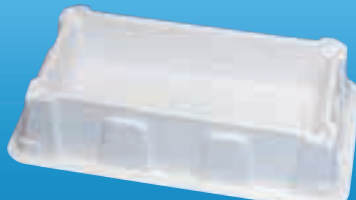

カタログ No.

BM-0850-3 電子滅菌 希望販売価格
¥12,600 → **¥8,820 @¥88.2**

キャンペーン中の参考価格

包装：100枚 (5枚×20パック) 大箱包装：—

材質：P.S

寸法：146×83×31mm (W×D×H)



注意：オートクレーブ不可

*キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

機器

ピペット

チップ

リザーバー

チューブ・プレート

細胞培養


アウトレット

リザーバー

8レーン・12レーン リザーバー

BMBio
ST (Standard & Stable)

40mL (1 レーン 5mL)

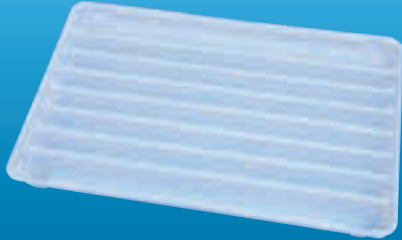

48mL (1 レーン 4mL)



カタログ No.

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

A-08 G 滅菌

¥3,600



¥2,520 @¥252

包装: 10枚 (1枚個装×10パック) **個装** 大箱包装: 10枚×10

- ◆ オートクレープ不可
- ◆ 材質: P.E
- ◆ 寸法: 125.5×84.5×12.3mm (W×D×H)
- ◆ 8連マルチチャンネルピペットに最適です。

カタログ No.

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

A-12 G 滅菌

¥3,600



¥2,520 @¥252

包装: 10枚 (1枚個装×10パック) **個装** 大箱包装: 10枚×10


- ◆ オートクレープ不可
- ◆ 材質: P.E
- ◆ 寸法: 125.5×84.5×12.3mm (W×D×H)
- ◆ 12連マルチチャンネルピペットに最適です。

リザーバー

12レーン リザーバー 36mL

Argos

36mL (1 レーン 3mL)

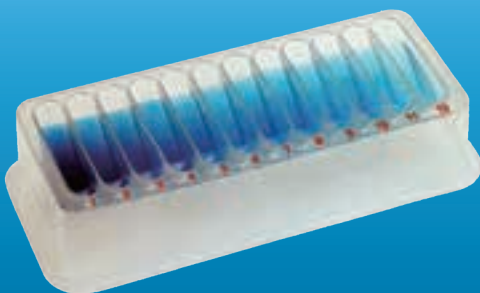

カタログ No.

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

BMA-B3135 G 滅菌

¥27,400



¥19,180 @¥959

包装: 20枚 (1枚個装×20パック) **個装** 大箱包装: 20枚×4

- ◆ オートクレープ可能 (121度、15分)
- ◆ 見やすい赤色の1～12のナンバリング付
- ◆ 8連マルチチャンネルピペット(8ch, 12ch)に最適
- ◆ G滅菌
- ◆ 材質: P.P
- ◆ 容量: 36mL (1レーン3mL)
- ◆ 底形状: V底
- ◆ サイズ (WxDxH): 148.0x62.4x36.1mm
- ◆ 色: 白

チューブ

リングロックチューブ〈サンプル低吸着・低残液〉

BMBio
ST (Standard & Stable)

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

0.6ml



カタログ No.

BM4006 未滅菌

希望販売価格


キャンペーン中の参考価格

¥4,100 → ¥2,870 @¥5.7

包装：500本 (500本×1パック)
大箱包装：500本×10

- ◆ 0.1ml刻みの見やすい目盛付
- ◆ サンプルの長期保存に最適な低吸着チューブ

1.5ml

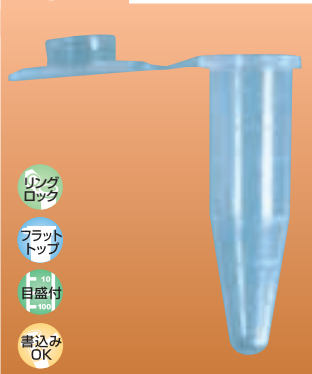

カタログ No.

BM4015 未滅菌

希望販売価格


キャンペーン中の参考価格

¥2,300 → ¥1,610 @¥6.4

包装：250本 (250本×1パック)
大箱包装：250本×10

- ◆ 0.25ml刻みの見やすい目盛付
- ◆ フタと胴体に文字の書き込みが可能

1.7ml

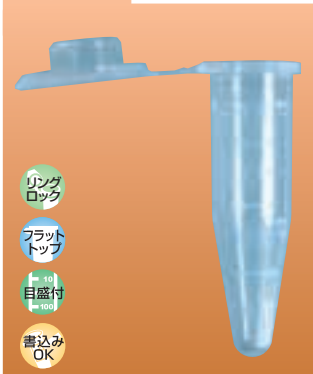

カタログ No.

BM4017 未滅菌

希望販売価格


キャンペーン中の参考価格

¥2,300 → ¥1,610 @¥6.4

包装：250本 (250本×1パック)
大箱包装：250本×10

- ◆ 0.25ml刻みの見やすい目盛付
- ◆ 抜群の透明度で、サンプルの目視が容易

2.0ml

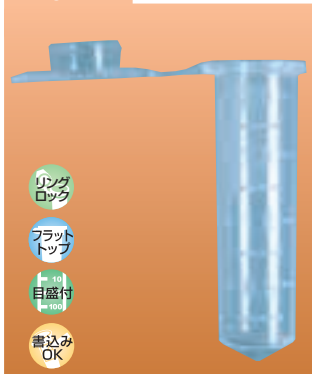

カタログ No.

BM4020 未滅菌

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

¥2,300 → ¥1,610 @¥6.4

包装：250本 (250本×1パック)
大箱包装：250本×10

- ◆ 0.25ml刻みの見やすい目盛付
- ◆ 14,000RCF (×g)の遠心耐性
- ◆ 抜群の透明度で、サンプルの目視が容易


チューブ

サンプリングチューブ

BMBio
ECO (Economy & Ecology)

DNase, RNase Free オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

0.6ml

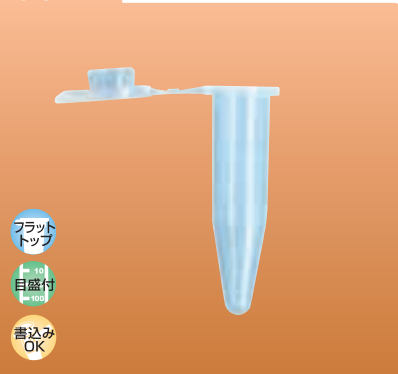

カタログ No.

BMC-06 未滅菌

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

¥7,900 → ¥5,530 @¥5.5

包装：1,000本 (1,000本×1パック)
大箱包装：1,000本×10

- ◆ 100μl刻みの目盛付
- ◆ 胴体に書き込み可能です。

1.5ml



カタログ No.

BMC-15 未滅菌

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

¥4,700 → ¥3,290 @¥6.6

包装：500本 (500本×1パック)
大箱包装：500本×10

- ◆ 100μl刻みの目盛付
- ◆ 胴体に書き込み可能です。

2.0ml



カタログ No.

BMC-20 未滅菌

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

¥5,300 → ¥3,710 @¥7.4

包装：500本 (500本×1パック)
大箱包装：500本×10

- ◆ 100μl刻みの目盛付
- ◆ 胴体に書き込み可能です。

サンプリングチューブ

セーフロックチューブ 5ml

chanshow®

DNase, RNase, Pyrogen, DNA, Pyrogen, PCR inhibitor Free

オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

5mL セーフティロックチューブ

フラット
トップ
目盛付

低吸着

カタログ No.

11.011.1004 未滅菌

希望販売価格

¥23,600

キャンペーン中の参考価格

→ ¥16,520 @¥33

包装：500本 (500本×1パック) 大箱包装：500本×6

- ◆ セーフロック付きで加熱処理、輸送に最適
- ◆ 低吸着仕様でタンパクやDNAの保存に最適
- ◆ 高い透明度
- ◆ 温度耐性：-80℃～121℃
- ◆ 遠心耐性：20,000xg
- ◆ 材質：P.P.

チューブ

遮光チューブ・セーフロックチューブ

chanshow®

DNase, RNase, Pyrogen, DNA, Pyrogen, PCR inhibitor Free

オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

0.6mL 遮光チューブ

フラット
トップ
目盛付
書込み
OK

1.5mL 遮光チューブ

フラット
トップ
目盛付
書込み
OK

2.0mL 遮光チューブ

フラット
トップ
目盛付
書込み
OK1.5mL セーフロック
遮光チューブフラット
トップ
目盛付
書込み
OK

カタログ No.

11.022.0801 未滅菌

キャンペーン中の参考価格

希望販売価格

¥6,100

→ ¥4,270
@¥4.3包装：1000本 (1000本×1パック)
大箱包装：1000本×5

- ◆ 高い遮光性
- ◆ 温度耐性：-80℃～121℃
- ◆ 遠心耐性：20,000xg
- ◆ 材質：P.P.

カタログ No.

11.022.0802 未滅菌

キャンペーン中の参考価格

希望販売価格

¥3,500

→ ¥2,450
@¥4.9包装：500本 (500本×1パック)
大箱包装：500本×10

- ◆ 高い遮光性
- ◆ 温度耐性：-80℃～121℃
- ◆ 遠心耐性：20,000xg
- ◆ 材質：P.P.

カタログ No.

11.022.0803 未滅菌

キャンペーン中の参考価格

希望販売価格

¥3,600

→ ¥2,520
@¥5包装：500本 (500本×1パック)
大箱包装：500本×10

- ◆ 高い遮光性
- ◆ 温度耐性：-80℃～121℃
- ◆ 遠心耐性：20,000xg
- ◆ 材質：P.P.

カタログ No.

11.012.0802 未滅菌

キャンペーン中の参考価格

希望販売価格

¥10,400

→ ¥7,280
@¥7.3包装：1000本 (1000本×1パック)
大箱包装：500本×10

- ◆ セーフロック付きで加熱処理、輸送に最適
- ◆ 高い遮光性
- ◆ 温度耐性：-80℃～121℃
- ◆ 遠心耐性：20,000xg
- ◆ 材質：P.P.

チューブ

2ポジションキャップ付チューブ〈目盛なし〉

EVERGREEN


オートクレープ不可

滅菌済

小分け包装

2ポジションキャップ

ポジション①は通気性用途、
ポジション②は非通気性用途に適しています。

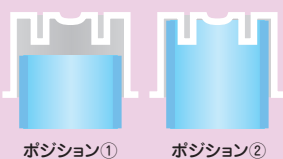

ポジション①


ポジション②

P.S

・オートクレープ不可
・遠心耐性：純水時 3000g
・温度耐性：-40℃～60℃

P.P

・オートクレープ不可
・遠心耐性：純水時 6000g
・温度耐性：-80℃～121℃

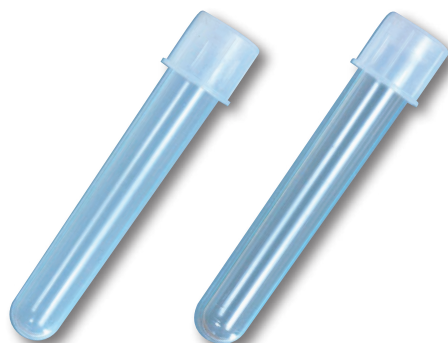

12×75mm 容量5.0ml



P.S

カタログNo.

222-2036-050

G 滅菌

希望販売価格

¥40,200



キャンペーン中の参考価格

¥28,140 @¥56.3

包装：500本（25本×20パック） 大箱包装：—

P.P

カタログNo.

222-2376-080

G 滅菌

希望販売価格


¥34,300



キャンペーン中の参考価格

¥24,010 @¥48.0

包装：500本（25本×20パック） 大箱包装：—

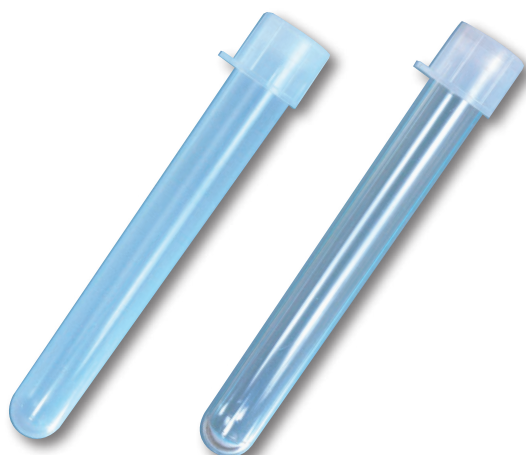

13×100mm 容量8.0ml



P.S

カタログNo.

222-2061-050

G 滅菌

希望販売価格

¥44,500



キャンペーン中の参考価格

¥31,150 @¥62.3

包装：500本（25本×20パック） 大箱包装：—

P.P

カタログNo.

222-2381-080

G 滅菌

希望販売価格

¥57,800



キャンペーン中の参考価格

¥40,460 @¥80.9

包装：500本（25本×20パック） 大箱包装：—



17×100mm 容量16.0ml



P.S

カタログNo.

222-2094-050

G 滅菌

希望販売価格

¥36,800



キャンペーン中の参考価格

¥25,760 @¥51.5

包装：500本（25本×20パック） 大箱包装：—

P.P

カタログNo.

222-2393-080

G 滅菌

希望販売価格

¥36,600



キャンペーン中の参考価格

¥25,620 @¥51.2

包装：500本（25本×20パック） 大箱包装：—

チューブ

2 ポジションキャップ付チューブ 12x75mm 4.0ml



オートクレーブ不可

- ◆ 2ポジションキャップ付のチューブ
- ◆ 使いやすい25本入り滅菌済み
- ◆ トレー内に整列されています。
- ◆ チューブ本体に目盛、書き込みスペース付
- ◆ ガンマ線滅菌済
- ◆ サイズ：Φ12mmx75mm
- ◆ 容量：4.0ml
- ◆ 材質：P.S/P.P (チューブ)、P.E (キャップ)
- ◆ 遠心耐性：最大RCF 1,400g(P.S)/最大RCF 3,000g(P.P)
- ◆ 温度耐性：P.P (ポリプロピレン) -90℃～100℃
P.S (ポリスチレン) -80℃～80℃
P.E (ポリエチレン) -20℃～70℃



カタログ No.

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

T405-2 P.S.製 ~~¥31,700~~ → **¥22,190 @¥44.4**

包装：500本 (25本×20プレート) 大箱：500本×4

カタログ No.

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

T405-2A P.P.製 ~~¥31,700~~ → **¥22,190 @¥44.4**

包装：500本 (25本×20プレート) 大箱：500本×4



チューブ

2 ポジションキャップ付チューブ 17x95mm 12.0ml



オートクレーブ不可

- ◆ 2ポジションキャップ付のチューブ
- ◆ 使いやすい25本入り滅菌済み
- ◆ トレー内に整列されています。
- ◆ チューブ本体に目盛、書き込みスペース付
- ◆ ガンマ線滅菌済
- ◆ サイズ：Φ17mm×95mm
- ◆ 容量：12.0ml
- ◆ 材質：P.S/P.P (チューブ)、P.E (キャップ)
- ◆ 遠心耐性：最大RCF 1,400g(P.S)/最大RCF 3,000g(P.P)
- ◆ 温度耐性：P.P (ポリプロピレン) -90℃～100℃
P.S (ポリスチレン) -80℃～80℃
P.E (ポリエチレン) -20℃～70℃



カタログ No.

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

T406-2 P.S.製 ~~¥43,700~~ → **¥30,590 @¥61.2**

包装：500本 (25本×20プレート) 大箱：500本×4

カタログ No.

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

T406-2A P.P.製 ~~¥43,400~~ → **¥30,380 @¥60.8**

包装：500本 (25本×20プレート) 大箱：500本×4



PCR プレート

96ウェルハードシェルPCRプレート 0.1mL

chanshow®

DNase, RNase, Pyrogen, DNA, Pyrogen, PCR inhibitor Free

オートクレーブ不可

0.1mL フルスカー



カタログ No.

15.000.3721 未減価

希望販売価格

¥18,600

キャンペーン中の参考価格

→ ¥13,020 @¥325.5

包装：40枚（8枚×5パック） 大箱：-

- ◆ 堅固なポリカーボネートフレームによりプレートの取り扱いが容易
- ◆ PCR後のプレートのゆがみがありません。
- ◆ 薄い肉厚のウェルによる高い熱伝導性
- ◆ ウェル上面を隆起させることにより確実なシーリングを実現
- ◆ 温度耐性：-80℃～100℃
- ◆ 遠心耐性：4,000xg
- ◆ 材質：フレーム P.C./ウェル P.P.
- ◆ 色：フレーム 白/ウェル ナチュラル



適合機種

BIO-RADのリアルタイムPCR装置 0.1ml用ブロックに使用可能です。

＼お得な情報を配信します！／

メルマガ会員募集中!!

登録
無料

メールニュースでは、

新商品発売・おススメ商品のご案内・キャンペーン開始のお知らせなど配信いたします。

メールニュースのご登録と解除はこちら

<https://www.bmbio.com/shop/mail/mag.aspx>

ご登録は無料です。メールニュースが不要である場合には、いつでも配信停止が可能です。




テストプレート

テストプレート 96ウェル



オートクレープ可能 (121℃, 15分)

96well

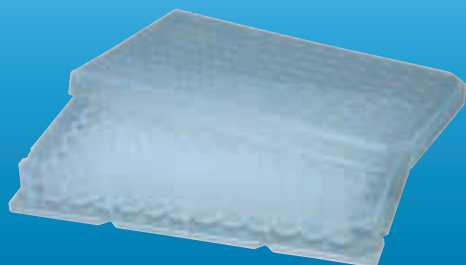

カタログ No.

希望販売価格


キャンペーン中の参考価格

290-8350-03F 未滅菌 ~~¥36,600~~ → **¥25,620 @¥256.2**

包装: 100枚 (10枚×10パック) 大箱包装: 100枚×4

- ◆ 材質: P.P
- ◆ 容量: 360 μ l / 1ウェル
- ◆ 寸法: 126.0×85.0×14.5mm (W×D×H)
- ◆ ウェル寸法: 6.5mm ϕ ×10.5mm (H)
- ◆ 温度耐性: -80℃～121℃
- ◆ 底形状: 平底

96well

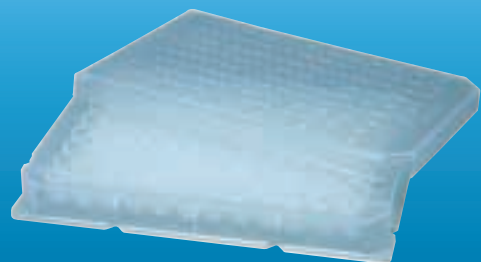

カタログ No.

希望販売価格


キャンペーン中の参考価格

290-8353-03R 未滅菌 ~~¥36,700~~ → **¥25,690 @¥256.9**

包装: 100枚 (10枚×10パック) 大箱包装: 100枚×4

- ◆ 材質: P.P
- ◆ 容量: 300 μ l / 1ウェル
- ◆ 寸法: 126.0×85.0×14.5mm (W×D×H)
- ◆ ウェル寸法: 6.5mm ϕ ×10.5mm (H)
- ◆ 温度耐性: -80℃～121℃
- ◆ 底形状: 丸底

96well

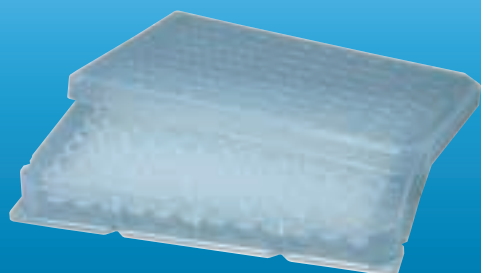

カタログ No.

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

290-8355-03V 未滅菌 ~~¥36,200~~ → **¥25,340 @¥253.4**

包装: 100枚 (10枚×10パック) 大箱包装: 100枚×4

- ◆ 材質: P.P
- ◆ 容量: 285 μ l / 1ウェル
- ◆ 寸法: 126.0×85.0×14.5mm (W×D×H)
- ◆ ウェル寸法: 6.5mm ϕ ×10.5mm (H)
- ◆ 温度耐性: -80℃～121℃
- ◆ 底形状: V底

機器

ビヘット

チップ

リザーバー

チューブ・プレート

細胞培養

アウトレット

セルカルチャー

遠心管 (少量パッケージ)



◆ TPPの遠心管スクリューキャップは2方向に溝が切っており、どの方向からも真っ直ぐにフタがのるので片手での操作が簡単

◆ 温度、遠心耐性

P.P (ポリプロピレン)：-60～120℃ ～15,500×G

P.S (ポリスチレン)：-40～70℃ ～1,700×G

P.E (ポリエチレン)：-40～70℃

書き込みスペース

全ての遠心管のフタは文字書き込み用のスペース付だから文字が書き易い。

先端メモリ

91015, 91050, 91115 には、他社に無い先端メモリ付。少ない容量のサンプル量を見ることができます。




カタログNo.	容量	材質	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
91054	50ml	コニカル P.P	160本 (20本×8パック)	¥16,000 →	¥11,200 @¥70.0
91014	15ml	コニカル P.P	360本 (40本×9パック)	¥33,800 →	¥23,660 @¥65.7

大箱包装：包装×4

セルカルチャー

細胞培養プレート (少量パッケージ)

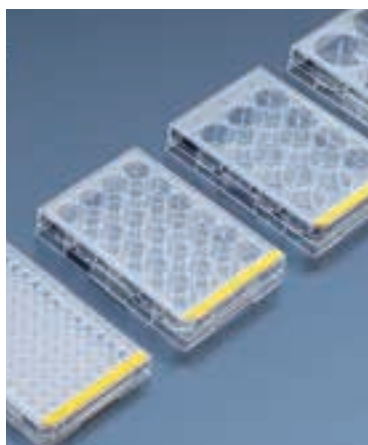

◆ 黄色のフラッグマークで、フタとプレートの同一方向を一目で確認できます。

全商品黒色ナンバリング

全商品に黒色ナンバリングがあるのでウェル確認が容易

フタ、本体にイエローラベル


全商品のフタ、本体にイエローラベルが有り、書き込み可能

プレート底面にはウェルNo.が刻印

プレート底面にウェルNo.が刻印されているので顕微鏡観察時のウェル確認が容易

全商品サイドグリップ付き

サイドグリップが付いているので持ち運びやハンドリングの際の滑り止めになります。

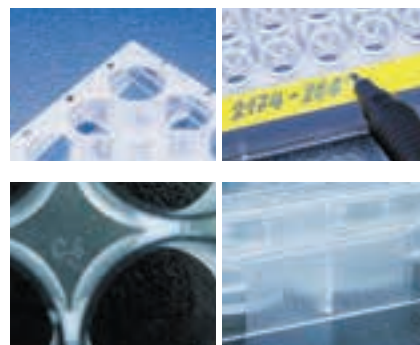

カタログNo.	ウェル数	仕様	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
92196	96ウェル	平底	54枚 (1枚個装×54パック)	¥32,800 →	¥22,960 @¥425.2
92197	96ウェル	丸底	54枚 (1枚個装×54パック)	¥32,800 →	¥22,960 @¥425.2
92148	48ウェル	平底	42枚 (1枚個装×42パック)	¥27,600 →	¥19,320 @¥460.0
92124	24ウェル	平底	42枚 (1枚個装×42パック)	¥27,600 →	¥19,320 @¥460.0
92112	12ウェル	平底	42枚 (1枚個装×42パック)	¥27,600 →	¥19,320 @¥460.0
92106	6ウェル	平底	42枚 (1枚個装×42パック)	¥27,600 →	¥19,320 @¥460.0

大箱包装：包装×4

OUTLET!
アウトレット

アウトレットコーナー

アウトレット商品は
他に多数ございます。
下記QRから
お確かめください。

他消耗品から汎用機器まで多数のラインナップがございます。

在庫限りとなりますので、お早めにお求め下さい。

アウトレットページ: <https://www.bmbio.com/shop/pages/bmoutlet.aspx>**OUTLET!**
アウトレット

チップ

NOVAS フィルターチップ



- ◆ ローリテンションタイプ
- ◆ ユニバーサルフィットチップ
- ◆ 目盛付き
- ◆ RNase、DNase、endotoxin フリー

-10μl**ロング**

全長: 45.7mm



原寸大

カタログ No.

アウトレット価格

在庫数

OL-FT-10XL-L-R G 滅菌**¥8,100****203**包装: 960本 (96本×10ラック) ラック**-100μl**

全長: 51.5mm



原寸大

カタログ No.

アウトレット価格

在庫数

OL-FT-100-L-R G 滅菌**¥8,000****78**包装: 960本 (96本×10ラック) ラック**-200μl**

全長: 51.5mm



原寸大

カタログ No.

アウトレット価格

在庫数

OL-FT-200-L-R G 滅菌**¥9,000****348**包装: 960本 (96本×10ラック) ラック**-1000μl**

全長: 78.1mm



原寸大

カタログ No.

アウトレット価格

在庫数

OL-FT-1000-L-R G 滅菌**¥9,100****445**包装: 960本 (96本×10ラック) ラック**-1000μl****ロング**

全長: 83.1mm



原寸大

カタログ No.

アウトレット価格

在庫数


OL-FT-1000XL-L-R G 滅菌**¥9,000****111**包装: 960本 (96本×10ラック) ラック

OUTLET!
アウトレットチップ
ロングチップ 低吸着タイプBMBio
ST (Standard & Stable)

-200μl



全長：59.3±0.2mm 目盛：10μl, 50μl, 100μl

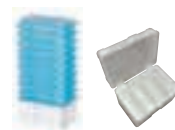

カタログ No.

OL-BMSSCH00010

アウトレット価格

¥1,500

在庫数

1,267包装：960本 (96本×10プレート) **詰め替え**

● 200μl用空ラック

アウトレット価格

¥1,300


在庫数

316包装：10個 (10個×1パック) **空ラック** 大箱：10個×10

-1000μl



全長：102±0.25mm 目盛：200μl, 500μl, 1000μl

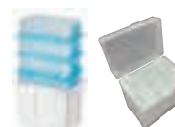

カタログ No.

OL-BMSSCH00011

アウトレット価格

¥700

在庫数

203包装：384本 (96本×4プレート) **詰め替え**

● 1000μl用空ラック


アウトレット価格

¥1,300

在庫数

662包装：10個 (10個×1パック) **空ラック** 大箱：10個×10**OUTLET!**
アウトレットPCR チューブ
PCR 8連チューブ・キャップNOVA
BIO

- ◆ PCRもしくはリアルタイムqPCR用チューブおよびキャップ
- ◆ 全体的に非常にクリアで透明感があります。
- ◆ キャップは容易に開けられますが、閉めればにしっかりフィットし、サンプル蒸発の心配はありません。

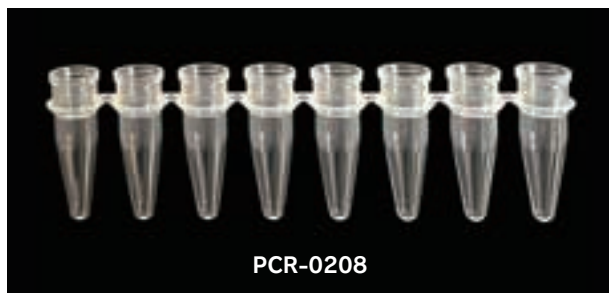

PCR-0208



PCR-0208CP-F

カタログ No.	規格	包装	アウトレット価格	在庫数
OL-PCR-0208	8連PCRチューブ 透明薄壁タイプ	1000本 (8連×125ストリップ)	¥6,500	468
OL-PCR-0208CP-F	8連フラットキャップ フロストタイプ	1000本 (8連×125ストリップ)	¥1,350	493

OUTLET!
アウトレット

電動ピペット

MPA 電動ピペット シングルチャンネル

AND
Discover Precision機
器ピ
ペ
ットチ
ップリ
ザー
バー

チューブ・プレート

細胞培養

ア
ウ
ト
レ
ット

高精度

誰でも高い
再現性の確保

速い

設定した量を正確に
吸引・吐出するので
調整不要

疲れない

プッシュボタンの
上下繰り返し
操作不要

カタログNo.

容量範囲

アウトレット価格

在庫数

OL-BM-MPA10 3年保証 0.3-10μL **¥33,600** 7

多彩で便利なモード

- ◆ MD (Multiple Dispensing: 連続分注) モード: 1 回の吸引で連続分注が可能
- ◆ MIX (混合) モード: ワンプッシュで設定した容量×回数でピペッティング
- ◆ AUTO + MIX (分注混合) モード: 分注後に続けて混合 (攪拌)
- ◆ SA (Sequential Aspirating: 逐次吸引) モード: 異なる液体を、設定した容量で吸引した後、全量吐出
- ◆ SD (Sequential Dispensing: 逐次排出) モード: 同一サンプルを異なる容量に分注
- ◆ ブローアウト動作/リバース動作も各モードごとに設定可能です。

親指が痛くなるのは

MPA電動ピペットなら

長いストローク量の操作
を繰り返すことが原因手になじむ形状は、長時間の作業による
疲労の蓄積や腱鞘炎の問題を低減

簡単設定

見やすい表示画面と使い
やすいボタン配置

有機溶剤・酸に強い設計

- ◆ 揮発性ガスが触れる部分はフッ素樹脂 (PVDF) を使用
- ◆ ピストン部には耐酸性・耐薬品性に優れたフッ素系グリースをコーティング

モデル		BM-MPA10	
容量範囲		0.3 - 10 μL	
性能	容量	1.0 μL	10 μL
	正確さ (±)	4.00%	1.00%
	再現性 (CV)	2.50%	0.40%
最小可変容量		0.1 μL	
プログラムメモリー		9種類	
分注スピード		5段階調整	
ピペット駆動方式		ステッピングモーター	
省エネルギー設定		10分後に自動電源オフ	
充電時間		約5時間 / 100%チャージ	
ACアダプター*1		ACアダプター: 100VAC 50/60Hz DC 5V (標準付属品)、 本体バッテリー: リチウムイオン電池 3.7V/920mAh	
最大分注回数*2		約1800回	
オートクレーブ		ロアパーツのみ可能	
材質		ピペット本体 (ABS)、 イジェクター (PP、ガラスファイバー20%)、 チップホルダー (PVDF)、ピストン (SUS)	
使用環境条件		15~30℃ / 85%RH以下	
全長		約290mm	
重量 (電池を含む)		約150g	

*1: バッテリー充電器と兼用 / 充電中も使用することが可能

*2: 標準モード、吸引・排出スピード最速設定にて

OUTLET!
アウトレット

ニトリルグローブ

AlphaTec® 58-530B

Ansell

他 工業系
アウトレットグローブ
商品はこちら

グリップ性能と耐薬品性の独自の組み合わせ

カタログ No.

アウトレット価格

在庫数

OL-58-530B-11

XXL

¥1,100

72

包装：1 双

グリップ性能と耐薬品性の独自の組み合わせ

- ◆ 少ないグリップ力でより正確に濡れたアイテムや油が付着したアイテムを取り扱えるようにAlphaTec® 手袋には、革新的なANSELL GRIP™ テクノロジーが採用されています。防液の耐薬品性とグリップ性能の独自の組み合わせに加え、柔軟性も発揮し、繊細な指先の動きが可能で、化学薬品を扱う作業にふさわしい選択肢です。
- ◆ 安全を強化するため信頼できる耐薬品性を提供します。特許取得済みのANSELL GRIP™ テクノロジーにより、製造中にコーティングのポリマーがライナーに浸透しないことが保証されます。このため一貫性のある徹底したコーティングが実現され、化学薬品が漏出し皮膚に接触する可能性が大幅に軽減されます。
- ◆ ブラックのアクリル製ライナーが採用されたAlphaTec® モデルは屋外の用途に推奨されています。

OUTLET!
アウトレット

PVC + ニトリルグローブ

AlphaTec® 04-003

Ansell

他 工業系
アウトレットグローブ
商品はこちら

中重量のPVCが手袋のフリース裏地をサポート

カタログ No.

アウトレット価格

在庫数

OL-04-003-8

M

¥640

72

OL-04-003-11

XXL

¥640

72

包装：1 双

さらに一歩進んだPVCソリューション

- ◆ フリース効果のある縫い目のない裏地によって快適性がさらに向上します。
- ◆ 濡れた物体や油が付いた物体を扱う優れた把持力
- ◆ 耐久性が高く、低温でも柔軟性を維持します。
- ◆ 低温環境で食品を扱うのに適しています。

OUTLET!
アウトレット

ポリウレタンコーティンググローブ

HyFlex® 11-518

Ansell

他 工業系
アウトレットグローブ
商品はこちら**超軽量、耐切創性、驚くほどの操作性、抜群の装着感を
兼ね備えた手袋**

カタログ No.

アウトレット価格 在庫数

OL-11-518-6	XS	¥990	144
OL-11-518-11	XXL	¥990	144

包装：1 双

**耐切創性を提供するDyneema® ダイヤモンドテクノロジーに
よる素手のような繊細な感覚**

- ◆ HyFlex® の性能を軽作業用手袋で実現。さらに素手のような繊細な感覚を提供し、細かな動きを可能にするHyFlex® スタイルの次世代ラインの製品です。
- ◆ 18ゲージの快適な装着感とEN ISOの耐切創性レベルB（ANSI耐切創性レベル2）の性能を組み合わせたこの手袋は、人工素材を組み合わせることによって実現された手袋です。
- ◆ やわらかく丈夫なライナーには、Dyneema® ダイヤモンドテクノロジー繊維が使用されています。薄手で通気性に優れており、一日中、手の甲の部分を通気しムレを防ぎます。
- ◆ 弾性を発揮するポリウレタン（PU）コーティングとDyneema® ダイヤモンドテクノロジー繊維を組み合わせることで、耐切創性試験で高い数値が得られました。またEN 規格レベル3（ANSIレベル3）の耐摩耗性により製品寿命を延長し、長くお使いいただけます。
- ◆ 正確さが求められる鋭利な部品、乾燥した部品、非常に小さな部品の取り扱いや組み立てにおいて、前例のない抜群の装着感、操作性、そして保護を提供します。

OUTLET!
アウトレット

ポリウレタンコーティンググローブ

HyFlex® 11-644

Ansell

他 工業系
アウトレットグローブ
商品はこちら**Ansell切創保護技術と人間工学に基づいたデザイン**

カタログ No.

アウトレット価格 在庫数

OL-11-644-5	XXS	¥630	144
OL-11-644-6	XS	¥630	144
OL-11-644-11	XXL	¥630	144
OL-11-644-12	XXXL	¥630	144

包装：1 双

安全性、耐久性、快適性を兼ね備えています。

- ◆ 性能、耐久性、快適性を兼ね備えています。
- ◆ ANSIレベル2の切創保護性能を備えており、軽量であり、手にフィットするように人間工学的にデザインされているため、小型の鋭い部品を扱う際に手の保護と作業の精度の完璧なバランスを実現します。
- ◆ Ansell切創保護技術を導入したHyFlex® 11-644手袋を着用すると、生産性や品質を低下させることなく、傷の治療にかかる費用を効果的に減らすことができます。
- ◆ 優れた切創保護機能、耐摩耗性、摩擦性、触覚感度を提供し、着用しやすい手袋です。

OUTLET!
アウトレット

ポリウレタンコーティンググローブ

HyFlex® 11-754**Ansell**

Ansellの最軽量ANSI A4/ISOレベルD耐切創性 タッチスクリーン手袋

カタログ No.

アウトレット価格

在庫数

OL-11-754-6	XS	¥1,070	144
OL-11-754-11	XXL	¥1,070	144
OL-11-754-12	XXXL	¥1,070	144

包装：1 双

ずっと身につけたくなるような、優れた耐切創性の手袋

- ◆ 超薄型ANSIカットレベルA4/ISOカットレベルD手袋で、最高の保護を提供するために3倍の耐切創性*を備えた手袋です。
- ◆ 生産性を向上させるため、タッチスクリーンとの互換性がある手袋
- ◆ 超軽量設計により、鋭利な部品の取り扱い、組み立ての際に手先の器用さが提供されます。

*標準ANSIカットレベルA2/ISOカットレベルB手袋と比較

他 工業系
アウトレットグローブ
商品はこちら

**OUTLET!**
アウトレット

ポリウレタンコーティンググローブ

HyFlex® 11-755**Ansell**

Ansellの最軽量ANSI A5/ISOレベルE耐切創性 タッチスクリーン手袋

カタログ No.

アウトレット価格

在庫数

OL-11-755-6	XS	¥1,120	144
--------------------	----	---------------	------------

包装：1 双

ずっと身につけたくなるような、優れた耐切創性の手袋

- ◆ 超薄型ANSIカットレベルA5/ISOカットレベルE手袋で、最高の保護を提供するために4倍の耐切創性*を備えた手袋です。
- ◆ 生産性を向上させるため、タッチスクリーンとの互換性がある手袋
- ◆ 超軽量設計により、鋭利な部品の取り扱い、組み立ての際に手先の器用さが提供されます。

*標準ANSIカットレベルA2/ISOカットレベルB手袋と比較

他 工業系
アウトレットグローブ
商品はこちら



OUTLET!
アウトレット

ポリウレタンコーティンググローブ

HyFlex® 11-757**Ansell****ANSI A7/ISOレベルF 耐切創性 タッチスクリーン 手袋**

カタログ No.

アウトレット価格 在庫数

OL-11-757-11 XXL**¥1,350** 144

包装：1 双

高い耐切創性と優れた快適性を兼ね備えた、耐久性に優れた軽量産業用手袋

- ◆ 高い保護機能：高い切創保護技術のINTERCEPT™ テクノロジーを採用し、優れたANSI A7/EN ISO F* 耐切創性レベルを実現
- ◆ 使いやすさ向上：適切な指先の感覚と快適な通気性を実現した超軽量、超薄型デザイン。タッチスクリーン対応で作業の中断がないので、日々の生産性が向上します。
- ◆ 耐久性向上：手のひら部分はポリウレタンコーティング加工により、優れた耐摩耗性
- ◆ 考え抜かれた人間工学：小指付け根部のテーラードフィットにより、自然な手の輪郭に寄り添う安全手袋
- ◆ 肌にやさしい安心感：ドイツ皮膚科学研究所Dermatest® により承認済ANSI規格A2/EN ISO Bレベルの7倍の耐切創性手袋

他 工業系
アウトレットグローブ
商品はこちら**OUTLET!**
アウトレット

ポリウレタンコーティンググローブ

EDGE® 48-705**Ansell****耐切創性の中作業用手袋**

カタログ No.

アウトレット価格 在庫数

OL-48-705-5 XXS**¥350** 144**OL-48-705-6** XS**¥330** 139**OL-48-705-11** XXL**¥350** 144

包装：1 双

ドライ環境で耐切創性と耐摩耗性が求められる作業レベルが中程度の作業向けのコスト効率に優れたソリューション

- ◆ 縫い目のないライナーとニットリストにより、耐切創性が求められる環境でぴったりとしたフィット感が実現されます。
- ◆ 2つの耐切創レベル（用途によって異なります）に加え、高水準の耐摩耗性と繊細な指先の感覚、抜群のフィット感を提供します。
- ◆ 掌部に施されたポリウレタン（PU）コーティングは、軽度のオイルが付着する環境において保護を提供します。
- ◆ 中厚手のレザー、厚手のコットン、またはアラミド製の手袋に代わるコスト効率の良い手袋です。

他 工業系
アウトレットグローブ
商品はこちら

OUTLET!
アウトレット

ポリウレタンコーティンググローブ

HyFlex® 11-601

Ansell



掌部に浸漬コーティングが施された、
繊細さが求められる軽作業用途向けの手袋

カタログ No.

アウトレット価格

在庫数

OL-11-601-5	XXS	¥150	144
OL-11-601-6	XS	¥150	144
OL-11-601-10	XL	¥150	144

包装：1 双

細心の注意が必要な作業向けに細かな手の動きと繊細な感覚の
絶妙なバランスを提供

- ◆ 細心の注意が必要な作業向けに細かな手の動きと繊細な感覚の絶妙なバランスを提供
- ◆ 手の細かな動きが求められるドライ環境における軽作業と繊細な作業向けに作られた産業用手袋です。
- ◆ 抜群の装着感で小さな対象物の正確な取り扱いを可能にします。

他 工業系
アウトレットグローブ
商品はこちら

**OUTLET!**
アウトレット

ポリウレタンコーティンググローブ

HyFlex® 11-618

Ansell



ドライ環境から軽度のオイル付着環境での軽作業向け
の掌部にコーティングが施されたウレタン背抜き手袋

カタログ No.

アウトレット価格

在庫数

OL-11-618-6	XS	¥170	142
OL-11-618-11	XXL	¥170	144

包装：1 双

手の繊細な感覚、細かな動き、そして柔軟性の基準

- ◆ まるで第2の皮膚のようなこの極めて薄手の手袋は、細心の注意が必要な作業向けに圧倒的な装着感とフィット感に加え、繊細な感覚を提供します。
- ◆ ドライ環境から軽度のオイル付着環境での幅広い軽作業向けのこの手袋は、現在使用している手袋よりもさらに優れたフィット感と繊細な感覚を提供し、正確な作業を可能にする手袋をお探しの作業者に理想的なソリューションです。

他 工業系
アウトレットグローブ
商品はこちら



OUTLET!
アウトレットラテックスコーティンググローブ
AlphaTec® 16-650**Ansell**

天然ゴムコーティングが施された厚手の手袋

カタログ No.

アウトレット価格 在庫数

OL-16-650-7	S	¥610	72
OL-16-650-8	M	¥610	72
OL-16-650-9	L	¥610	72
OL-16-650-10	XL	¥610	72

包装：1 双

インターロックライナーに天然ゴムのコーティングが施された、
人間工学に基づく設計が採用された手袋

- ◆ 軽度から中程度の負担がかかるガラスの取り扱い作業で、さらに高い性能を発揮する手袋です。
- ◆ 手の自然な形状に沿う人間工学に基づく設計が採用されています。より自然な手袋の形状により、フィット感が改善され、安全な取り扱い作業が可能となります。
- ◆ クッション性、耐切創性、快適な装着感を併せ持つ手袋です。
- ◆ 合格品質基準 (AQL) 16-650 : 1.5 (EN374)

他 工業系
アウトレットグローブ
商品はこちら**OUTLET!**
アウトレットポリウレタンコーティンググローブ
HyFlex® 11-724**Ansell**優れた耐切創性を実現するINTERCEPT™ テクノロジーが採用され、掌部に浸漬コーティングが施された
13Gの中作業用手袋

カタログ No.

アウトレット価格 在庫数

OL-11-724-6	XS	¥500	144
OL-11-724-11	XXL	¥500	144

包装：1 双

最適な耐切創性に加え、極めて優れた柔軟性とフィット感を提供

- ◆ EN規格の耐切創性レベル3 (ANSIレベル2) の性能を実現する INTERCEPT™ テクノロジーの糸が使用された13Gの薄手のライナーが採用されています。
- ◆ このライナーには、やわらかくひんやりとした触り心地で1日中快適な装着感を提供する最適化されたLycra® も採用されています。
- ◆ 掌部に施されたポリウレタン (PU) 浸漬コーティングにより、軽度のオイルが付着する環境においてグリップ性能が強化され、安全な取り扱い作業が可能です。また、EN規格レベル4 (ANSIレベル6) の耐摩耗性が提供されるため、手袋の寿命が延び、長くお使いいただけます。

他 工業系
アウトレットグローブ
商品はこちら

OUTLET!
アウトレット

ポリウレタンコーティンググローブ

HyFlex® 11-729

Ansell

他工業系
アウトレットグローブ
商品はこちら

優れた耐切創性により、優れた快適性とフィット感を実現

カタログ No.

アウトレット価格

在庫数

OL-11-729-6	XS	¥480	144
OL-11-729-11	XXL	¥480	144
OL-11-729-12	XXXL	¥480	139

包装：1 双

高い快適性と指先感覚性を提供する、タッチスクリーンの使用に適合したポリウレタン手袋

- ◆ 触覚感度の向上：HyFlex® 11-729産業用手袋の人差し指部分と親指部分のカーボンインサージョンにより、触覚感度が向上し、タッチスクリーンの使用に適合した手袋になります。
- ◆ 指先感覚性の向上：手袋の裏地とコーティングに使用されたSpandex® は、指先感覚性を高め、手の疲労を軽減させる手袋です。
- ◆ 追加された保護機能：INTERCEPT™ 耐切創性技術の紡糸繊維により、裂傷に対する保護が実現されます。
- ◆ 把持力の向上：ポリウレタンコーティングにより把持力が高まるため、乾燥した環境や少し油っぽい環境で物品を安全に取り扱うことができます。
- ◆ 快適性の向上：裏地に含まれているHPPE Lycra® は、作業者の快適性を高め、日常使用時の負担を軽減します。可能です。また、EN規格レベル4（ANSIレベル6）の耐摩耗性が提供されるため、手袋の寿命が延び、長くお使いいただけます。

OUTLET!
アウトレット

ニトリルコーティンググローブ

HyFlex® 11-926

Ansell

他工業系
アウトレットグローブ
商品はこちら

オイルが付着する環境において撥油性とグリップ性能を発揮する軽作業用の多目的手袋

カタログ No.

アウトレット価格

在庫数

OL-11-926-6	XS	¥530	144
OL-11-926-7	S	¥530	144
OL-11-926-8	M	¥530	144
OL-11-926-9	L	¥530	140
OL-11-926-10	XL	¥530	144
OL-11-926-11	XXL	¥530	144

包装：1 双

オイルが付着する環境で究極の性能を発揮

- ◆ さらに快適な装着感を提供し、手の細かな動きを可能にするため、人間工学に基づく理想的な形状を採用
- ◆ オイルの浸透と関節の擦り傷を防止する保護を強化
- ◆ 長くお使いいただくことを考慮した高い耐摩耗性

OUTLET!
アウトレット

ニトリルグローブ

AlphaTec® Solvex® 37-843

Ansell

アジア人の手にぴったりとフィットし、
幅広い用途で優れた保護性能を発揮

カタログ No.

アウトレット価格 在庫数

OL-37-843-8 M ￥200 111

OL-37-843-9 L ￥200 111

包装：1 双

アジア人の手にぴったりとフィットし、幅広い用途で優れた
保護性能を発揮他 工業系
アウトレットグローブ
商品はこちら

- ◆ 高性能ニトリル化合物により、耐化学薬品性と強度の両方の性能を併せ持つ
- ◆ ゴム手袋やネオプレン製手袋よりも優れた耐引裂性、耐突刺性、耐摩耗性を
実現
- ◆ 高水準の柔軟性、快適な装着感、優れた指先の感覚を提供します。
- ◆ 膨張や性能低下、劣化がなく、接触性皮膚炎を引き起こすことがない

OUTLET!
アウトレット

ポリウレタンコーティンググローブ

EDGE® 48-126

Ansell



軽作業用の経済的なソリューション

カタログ No.

アウトレット価格 在庫数

OL-48-126-5 XXS ￥90 143

OL-48-126-6 XS ￥90 141

OL-48-126-11 XXL ￥90 144

包装：1 双

ドライ環境から軽度のオイル付着環境において、
十分な耐摩耗性、グリップ性能、指先の感覚を実現します。他 工業系
アウトレットグローブ
商品はこちら

- ◆ 15ゲージのポリエステルライナー - 抜群の肌触りを提供し手の細かな動きをサポーターします（用途の要件により異なります）。
- ◆ 縫い目のないニットライナーとブラックのポリウレタン浸漬コーティングが施された伸縮性のあるニットライナーが採用されています。
- ◆ この組み合わせは、コットンのキャンバス地の手袋や厚手のコットン製の手袋よりも、優れた柔軟性を提供し、指先の細かな動きを可能にします。
- ◆ 高い性能を発揮するコスト効率に優れた軽作業用手袋です。

カテゴリーカタログ発刊中！



詳細はこちら↓

<https://www.bmbio.com/shop/pages/categorycatalog.aspx>

◆お願いおよび注意事項◆

- 希望販売価格・・・希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格は参考であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。
実際の販売価格は、ご注文の際に販売店様にてご確認ください。
記載の希望販売価格は、当社が定める希望販売価格であり、参考価格です。
本希望販売価格は2026年6月1日現在の価格で、同価格は カタログ、ホームページで確認できます。
なお、予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際にご確認ください。
記載の希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格には消費税は含まれておりません。
- 使用範囲・・・記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。
人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。

■ 代理店

BMBio ビーエム機器株式会社
〒135-0016 東京都江東区東陽2丁目2番20号 東陽駅前ビル
www.bmbio.com

商品の仕様・詳細について TEL: 03-6666-5903/FAX: 03-6666-5907
商品の在庫・ご注文について TEL: 03-6666-5902/FAX: 03-5677-4081