



自動キャップ開閉装置

EzDecap™

スマートなデザインの自動キャップ開閉装置

EzDecap™ は、スクリーキャップマイクロチューブ・クライオチューブから 50mL の遠心管まで幅広い用途で、チューブのキャップを自動で開閉するお手軽なキャップ開閉装置です。特許出願中の独自の技術を用いており、キャップの落下エラーを低減し、片手で効率的なキャップ開閉が可能です。さまざまなチューブに対応した 4 つの動作モードを搭載し、かつ、コンパクトなデザインにより実験台のみならず、安全キャビネット内でも使用可能です。



動画はこちら



EzDecap
日本語マニュアル

◆ 業務効率の向上

特許出願中の独自の技術により、片手での操作を可能にし、日常業務を効率化します。

◆ 省スペースで設置可能

コンパクトなデザインで、実験台や安全キャビネット内で使用可能

◆ 様々な大きさのチューブに幅広く対応

クライオチューブから 50mL 遠心管まで、キャップグリッパーの交換不要で、様々な大きさのチューブに対応可能です。

適用範囲：キャップの直径 11 ~ 40mm

◆ 多彩な動作モード

様々なキャッピングおよびデキャップのニーズに合わせて、4 つの異なる動作モードから選択可能です。



4オペレーションモード

1. Hold Cap モード

キャップを開ける→キャップを締める、を繰り返します。
※キャップを開けた際、キャップはグリッパーに保持されます。

2. Release Cap モード

キャップを開ける→キャップを締める、を繰り返します。
※キャップを開けた際、キャップはグリッパーから外れます。

3. Decap Only モード

連続でキャップを開けます。
※キャップを開けた際、キャップはグリッパーから外れます。

4. Cap Only モード

連続でキャップを締めます。

サイズ (W×D×H)	170×240×290mm
重量	3.0kg (Body : 0.9kg, Bracket : 2.1kg)
所要時間 (Cap/Decap)	約3秒
適用キャップの範囲	直径11 ~ 40mm
電源	Input : AC100-240V, 50/60Hz Output : DC9V, 4A

カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格
BRDC-0000	EzDecap™ スクリューキャップ開閉システム	1式	¥210,000

■ 構成：本体、電源コード、マニュアル、保証書



NEST 15mL/50mL遠心管

NEST®

- ◆ 目盛、書き込みスペース付
- ◆ 遠心耐性：最大12,000g
- ◆ リークプルーフフラットキャップ
- ◆ 片手の操作が可能なキャップ
- ◆ 温度耐性：P.P (ポリプロピレン)：-80℃～121℃
HDPE (ポリエチレン)：-40℃～70℃
- ◆ 生物学的解析に最適
- ◆ 高強度、無毒性原材料
- ◆ 原材料はUSP CLASS VI準拠

- ・オートクレーブ不可
- ・DNase, RNase, Pyrogen Free
- ・電子線滅菌、SAL=10⁻⁶
- ・材質：P.P (キャップは、HDPE)

カタログ No.	寸法 (mm)	容量 (mL)	パッケージ	包装	希望販売価格
WNB601002	電子線滅菌 Φ17×118	15	バルク	500本 (50本×10パック)	¥15,200
WNB602002	電子線滅菌 Φ27×114	50	バルク	500本 (25本×20パック)	¥20,800



NESTクライオチューブ

NEST®

クライオチューブは生物学、製薬、食品、その他の産業分野において実験室で使用する重要な消耗品の一つです。医療グレードのポリプロピレン (PP) 製で、液体窒素の気相環境で-196℃までの低温保存が可能です。

- ◆ アウターキャップはねじ山が直接外部に露出しないため、二次汚染の可能性を最小限に抑制
- ◆ 2Dバーコードなし
- ◆ キャップタイプ：アウターキャップ
- ◆ 容量：2.0mL
- ◆ 全高：45.5mm
- ◆ 蓋の高さ：10mm
- ◆ 外径：12.85mm
- ◆ 温度耐性：-196℃～121℃



カタログ No.	寸法 (mm)	容量 (mL)	パッケージ	包装	希望販売価格
WNB607401	Φ12.85×45.5	2.0	バルク	500本 (50本×10パック)	¥17,300



スクリューキャップチューブ 5.0mL 自立型 クリア 滅菌済

chanshow®

- ◆ スクリューキャップチューブ (12.101.0004) 用キャップ (13.100.0100)
- ◆ 95kpa耐圧で液漏れしません。
- ◆ 人間工学に基づいた、扱いやすいデザイン
- ◆ DNase, RNase, パイロジェンフリー
- ◆ 材質：ポリプロピレン製
- ◆ 滅菌済み
- ◆ 温度耐性：-80℃～121℃

カタログ No.		包装	希望販売価格
12.101.0004	滅菌 スクリューキャップチューブ (チューブのみ) 5.0mL 自立型 クリア 滅菌済	500本 (500本×1パック)	¥8,500
13.100.0100	滅菌 スクリューキャップ(キャップのみ) 5mLチューブ 12.101.0004用 滅菌済	500個 (500個×1パック)	¥8,200

卓上遠心機 5mL / 15mL チューブ対応




- ◆ 1.5mLマイクロチューブから15mL遠心管まで対応可能な低速卓上遠心機
15mL遠心管 (6本)、または5mLチューブ (6本)、付属のアダプターを用いる事で
1.5mL/2.0mLマイクロチューブ (6本) も使用可能
- ◆ 遠心条件は回転数 (rpm)、または遠心力 (xg) とタイマーで設定
回転数300~5,000rpm、または遠心力10~2600xgで設定可能
タイマーは30秒~99分で設定可能。※タイマー設定無しで連続運転も可能
- ◆ 2種類のプログラムを保存可能 保存したプログラムはボタン1つで呼び出し可能
- ◆ 運転終了後 (ローター静止後)、カバーは自動でオープン

1 年保証

収容本数	15mL遠心管×6本、または5mLチューブ×6本、 1.5mL/2.0mLマイクロチューブ×6本、 テストチューブ (Φ13×75~100mm) ×6本
回転数 (rpm)、設定単位	300~5,000rpm、10rpm
遠心力 (xg)、設定単位	10~2,600xg、10xg
タイマー	30秒~99分
安全装置	フタロック、速度超過検出装置、自動内部診断装置
サイズ (D×W×H)	240×300×180mm
重量	5.3kg
電源	100-240V、50/60Hz



カタログ No.	希望販売価格
CD-0506 卓上遠心機	¥98,000

■ 構成: 遠心機本体 (ローター付)、アダプター (1.5mL/2.0mLチューブ用、6本)、アダプター (テストチューブ (Φ13) 用、6本)、六角レンチ、電源ケーブル、マニュアル、保証書

ニトリル/ネオプレングローブ

Microflex® 93-260



カタログNo.	サイズ	包装	希望販売価格
93260060	XS	50枚	¥4,800
93260070	S	50枚	¥4,800
93260080	M	50枚	¥4,800
93260090	L	50枚	¥4,800
93260100	XL	50枚	¥4,800
93260110	XXL	50枚	¥4,800
大箱包装: 50枚×10箱			

化学薬品に対して優れた耐性を発揮します。

最薄の耐薬品性使い捨て手袋 (合成複合素材製)

- ◆ 刺激の強い化学薬品に対する優れた保護を提供する3層設計
有機溶剤耐性に優れたニトリルと酸・アルカリ耐性に優れたネオプレンを重ねることで優れた耐薬品性を実現
- ◆ 繊細な指先の感覚と細かな指先の動きを可能にする最薄の耐薬品性使い捨て手袋
- ◆ 抜群のフィット感、装着感、柔軟性を実現する極めてやわらかい素材と人間工学に基づく設計
- ◆ 有害物質に対する信頼できる保護を提供するため、許容されるピンホール発生率が低い (合格品質基準 (AQL) 0.65)



LLDPE ラミネートフィルム コーティンググローブ

AlphaTec® 02-100



カタログNo.	サイズ	包装	希望販売価格
02-100-6	XS	1双	¥2,800
02-100-7	S	1双	¥2,800
02-100-8	M	1双	¥2,800
02-100-9	L	1双	¥2,800
02-100-10	XL	1双	¥2,800
大箱包装: 1双×10袋			

化学薬品に対して優れた耐性を発揮します。

各種飛沫と応急キットとしてお使いいただける汎用性の高い手袋で、自信を持って作業していただけます。

- ◆ 耐化学薬品性、5層ラミネート構造の手袋
- ◆ 手専用の人間工学に基づく設計
- ◆ 幅広い耐性を発揮
- ◆ 100%検査済み。手袋はすべて個別に空気圧試験が実施されています。

■ 主な特徴

- ・ 合格品質基準 (AQL) : 0.065
- ・ 個別に空気圧試験を実施、100%検査済み
- ・ シリコン不使用



化学薬品取扱い用
インナー用グローブ
として売られています!



プレート用シール

PCRプレート 96well用シール

カタログ No.	包装	希望販売価格	大箱包装
MB-PSM 	100枚 (10枚×10パック)	¥11,500	100枚×4

- ◆ PCR 96ウェルプレート用シール
- ◆ 強い粘着力



- ・ DNase, RNase, DNA, PCR Inhibitor, ATP, endotoxin Free
- ・ 寸法 (W×D) : 142×79.3mm
- ・ シール厚: 80μm
- ・ 材質: P.P
- ・ 温度耐性: -40℃~120℃



qPCRプレート 96Well用シール

カタログ No.	包装	希望販売価格	大箱包装
MB-BQSM 	100枚 (10枚×10パック)	¥17,300	100枚×4

- ◆ リアルタイムPCR 96ウェルプレート用シール
- ◆ 透明度が高く、再現性と高い透過性のあるシール
- ◆ 強い粘着力



- ・ DNase, RNase, DNA, PCR Inhibitor, ATP, endotoxin Free
- ・ 寸法 (W×D) : 142×79.3mm
- ・ シール厚: 80μm
- ・ 材質: ポリエステル
- ・ 温度耐性: -40℃~120℃



qPCRプレート 96Well用シール

カタログ No.	包装	希望販売価格	大箱包装
MB-QSM 	100枚 (10枚×10パック)	¥28,300	100枚×4

- ◆ リアルタイムPCR 96ウェルプレート用シール
- ◆ 透明度が高く、再現性と高い透過性のあるシール



- ・ DNase, RNase, DNA, PCR Inhibitor, ATP, endotoxin Free
- ・ 寸法 (W×D) : 141.4×79.3mm
- ・ シール厚: 80μm
- ・ 材質: ポリエステル
- ・ 色: ウルトラクリア
- ・ 温度耐性: -40℃~120℃



PCRプレート用シール アルミ製

カタログ No.	包装	希望販売価格	大箱包装
MB-ASM 	100枚 (10枚×10パック)	¥13,100	100枚×4

- ◆ PCR用アルミシール
- ◆ PCRもしくは保存用
- ◆ 強い粘着力




- ・ DNase, RNase, DNA, PCR Inhibitor, ATP, endotoxin Free
- ・ 寸法 (W×D) : 142×79.3mm
- ・ シール厚: 60μm
- ・ 材質: アルミニウム
- ・ 温度耐性: -80℃~120℃



リアルタイムPCRプレート 384well フルスカー

- ◆ DNase, RNase, DNA, Endotoxin Free
- ◆ 肉薄のため熱伝導性に優れています。
- ◆ 未滅菌
- ◆ ABI社、Bio-Rad社 384ウェル サーマルサイクラー適合 (MB-384)
- ◆ 通常 (ナチュラルカラー) のPCRプレートより蛍光強度を増強 (MB-384W)
- ◆ Roche社、Bio-Rad社 384ウェル サーマルサイクラー適合 (MB-384W)
- ◆ 材質: P.P
- ◆ 色: ナチュラル (MB-384) / ホワイト (MB-384W)

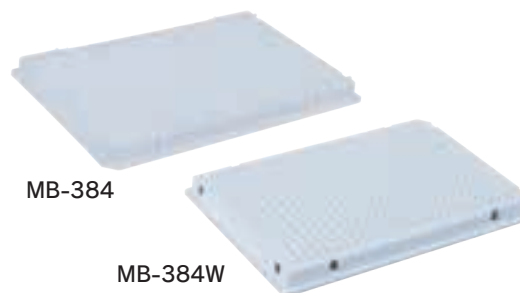

カタログ No.	包装	希望販売価格
MB-384 	リアルタイムPCRプレート 384well フルスカー ナチュラル 50枚 (10枚×5パック)	¥46,200
MB-384W 	リアルタイムPCRプレート 384well フルスカー ホワイト 50枚 (10枚×5パック)	¥49,300

◆お願いおよび注意事項◆

- 希望販売価格 … 希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格は参考であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。実際の販売価格は、ご注文の際に販売店様にてご確認ください。
記載の希望販売価格は当社が定める希望販売価格であり、参考価格です。本希望販売価格は2025年4月1日現在の希望販売価格で、同価格はカタログ、ホームページで確認できます。なお、予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際にご確認ください。
記載の希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格には消費税は含まれておりません。
- 使用範囲 … 記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。